

경질 시료의 완벽한 물리적 변환 메커니즘


FRITSCH Jaw Crusher & Disk Mill
연속 공정 시스템



SYSTEM STATUS: **READY** ■
PRECISION MILLING INITIATED ■

95mm에서 100μm로의 연속적 스케일 다운

조분쇄(Coarse Grinding)부터 미분쇄(Fine Grinding)까지.
가장 단단한 경질 및 취성 시료를 처리하기 위한 두 단계의 연속 전처리 솔루션.

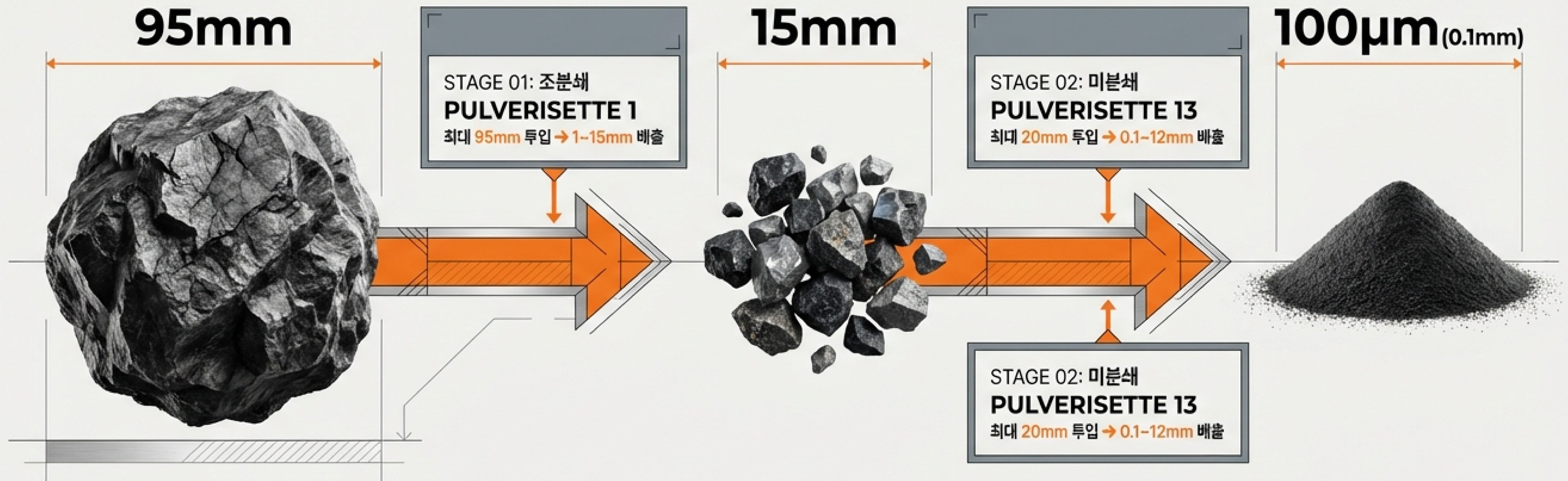

STAGE 01: 조분쇄 단계 (PULVERISETTE 1)


주먹 크기의 대형 시료를 1차적으로 파쇄하는
고성능 조분쇄기

최대 투입 크기
95 mm


최종 분쇄 입도
1 ~ 15 mm

최대 처리량
200 kg/h

편심 진동수
308 rpm

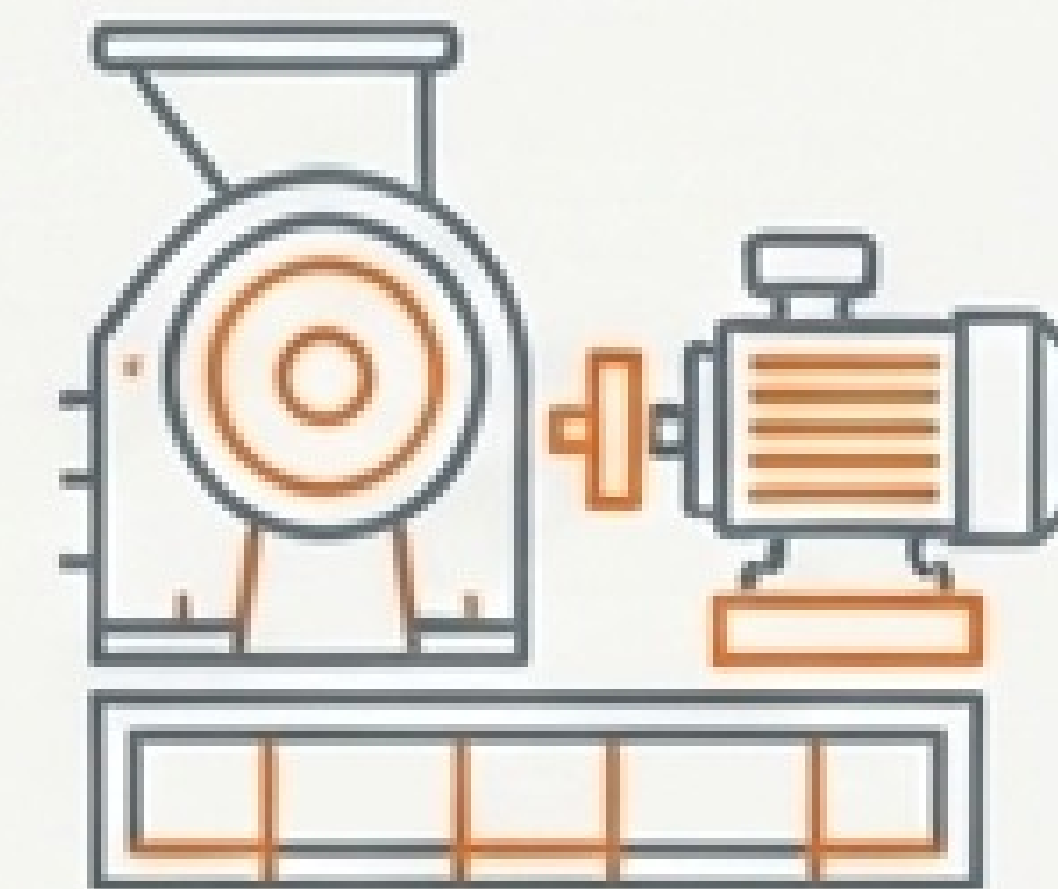

간편한 분해 조립 구조로 설계되어
완벽한 세척 및 유지보수성 확보.

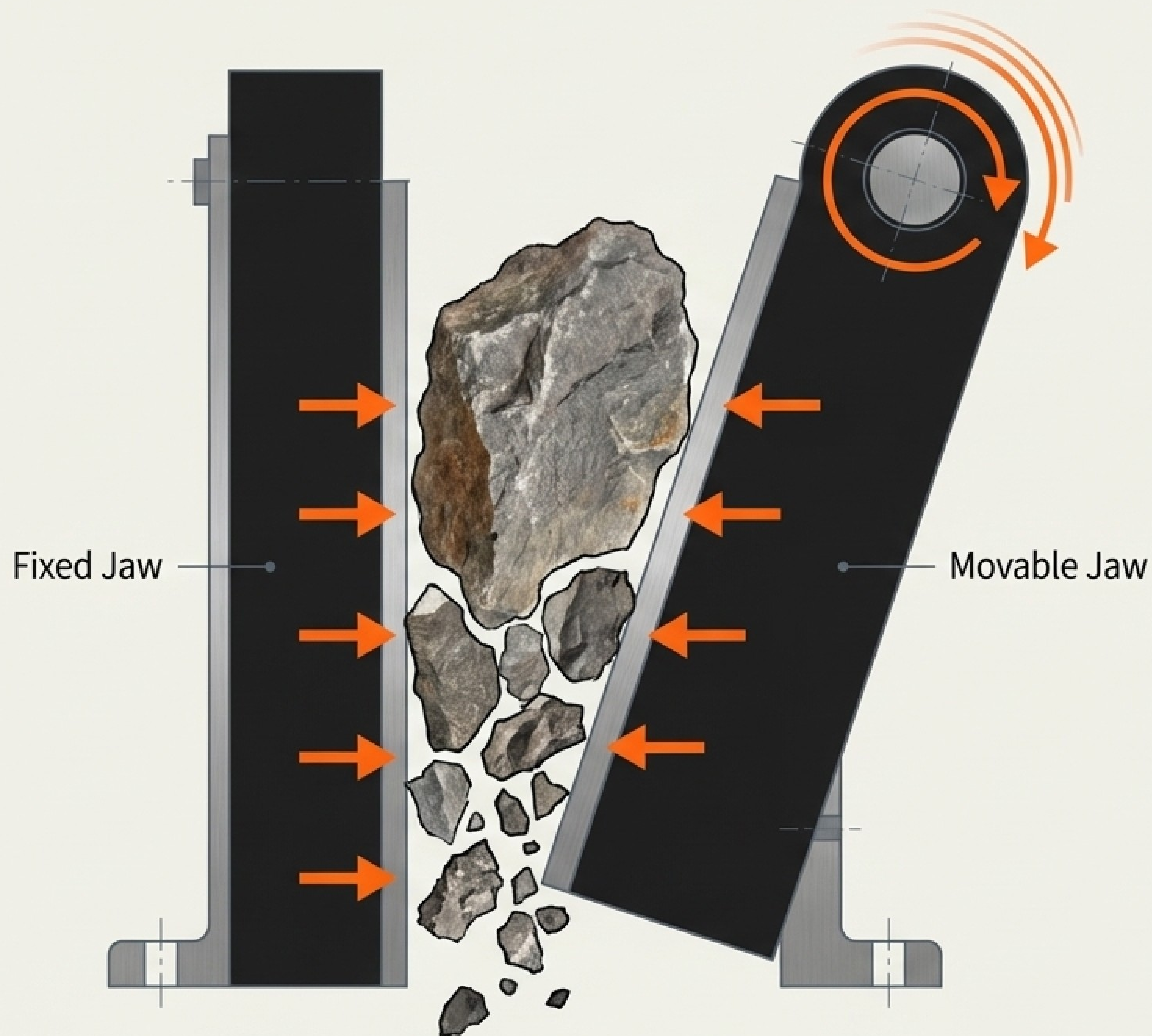

압력(Pressure) 기반의 물리적 파쇄 메커니즘

2개의 Jaw(Fixed & Movable) 사이에서 발생하는 강력한 압력을 통해 물리적 파쇄를 실행합니다.

Gap Control

Jaw 사이의 간격을 미세 조정하여 최종 입도를 정밀하게 제어.

Crush Dynamics

편심 구동(Eccentric drive)을 통한 규칙적이고 강력한 압착 에너지 전달.

Component Scale

Jaw 크기 100 x 260 mm.
최소 처리 시료량 20 ml.

연속 공정 시너지: 병목 없는 공정 전환

조분쇄 직후 별도의 이송 없이 즉시 미분쇄
공정으로 진입하는 다이렉트 파이프라인.



배치(Batch) 및 연속(Continuous)
투입 완벽 지원

최소화된 샘플 손실을


처리 시간의 획기적 단축

STAGE 02: 미분쇄 단계 (PULVERISETTE 13)

조크러셔를 통과한 15mm 이하의 시료를
설탕 크기 수준으로 미세하게 분쇄하는
디스크 밀

1	최대 투입 크기	20 mm
2	최종 분쇄 입도	0.1 ~ 12 mm
3	최대 처리량	150 kg/h
4	디스크 회전 속도	440 rpm

최소 20~30ml의 소량 시료부터 대용량
연속 처리까지 유연한 스케일 대응.

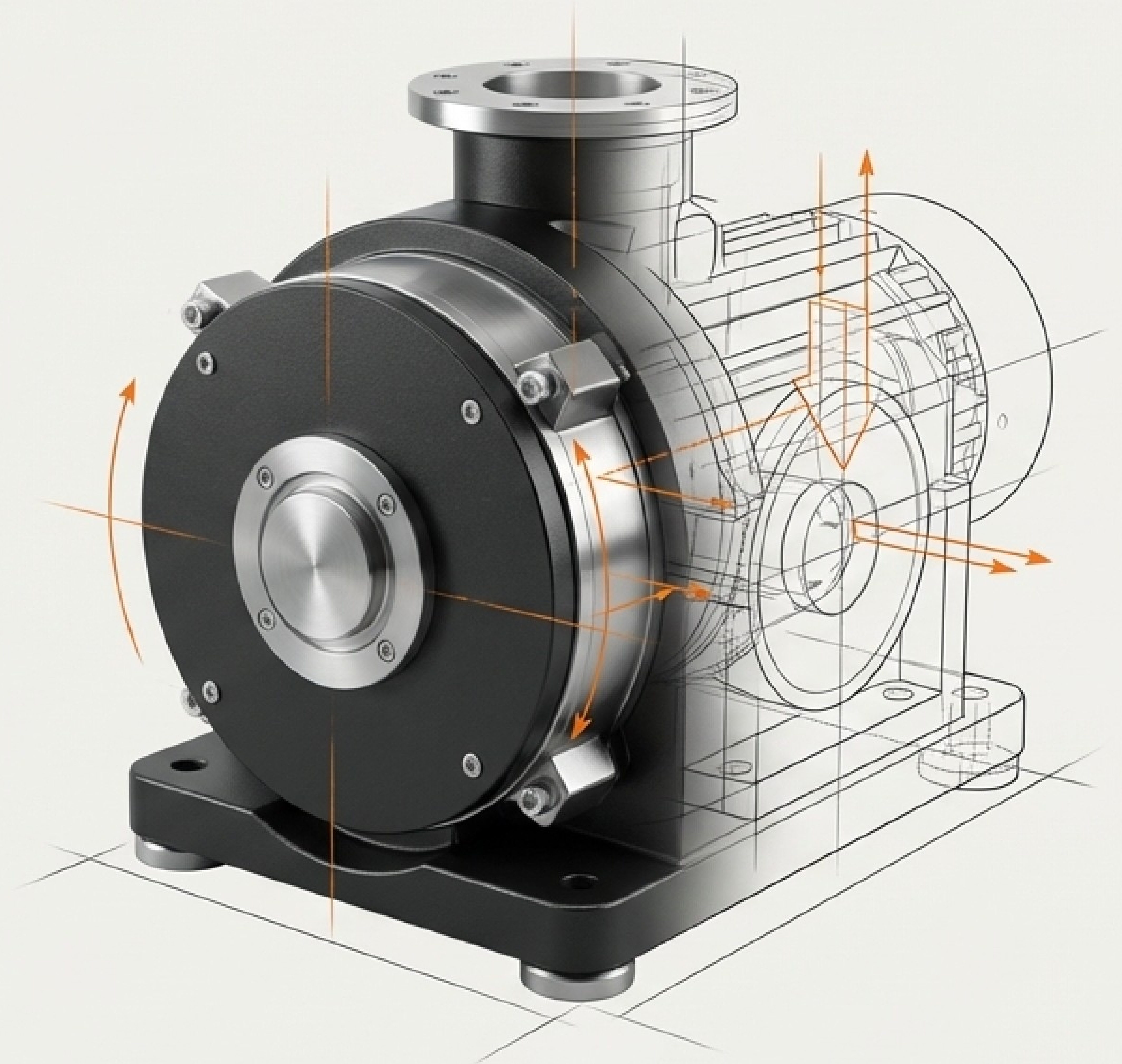



전단력(Shearing) 기반의 정밀 분쇄 메커니즘

고속으로 회전하는 2개의 디스크 사이에서 발생하는
마찰과 전단력을 이용하여 시료를 미립화합니다.

Gap Control

고정 디스크와 회전 디스크 사이의 간격을 밀리미터
단위로 조절하여 **100 마이크로미터(0.1mm)**
단위의 입도 달성.

Shear Dynamics

440 rpm의 디스크 회전 속도가 만들어내는
강력한 마찰 분쇄력.

Component Scale

디스크 직경 200 mm.

디지털 소재 선택 매트릭스

시료의 특성과 오염 방지(Heavy-metal-free 등) 요구사항에 맞춘
다양한 분쇄 부품(Jaw & Disk) 재질 옵션.

소재 (Material)	특성 및 용도	적용 기기
Tungsten carbide	극강의 내마모성	P1 / P13 적용
Zirconium oxide	세라믹 시료 교차 오염 방지	P1 / P13 적용
Manganese steel	일반적인 광물 및 암석류	P1 / P13 적용
Hardened cast steel	범용적인 경질 시료	P13 적용
Tempered steel / Stainless steel	특수 화학 분석용	P1 적용
Cr-free steel	크롬 프리 분석용	P1 적용

경질 및 취성 시료 적용 스펙트럼

암석 및 토양 (Geology & Soil)



화강암, 규산염, 석영, 콘크리트,
클링커 완벽 처리.

광업 및 야금 (Mining & Metallurgy)



슬래그, 코크스, 석탄, 바나듐,
각종 광석의 신속한 전처리.

첨단 세라믹 및 유리 (Ceramics & Glass)



소결 세라믹, 치과용 특수 세라믹,
공업용 유리의 오염 없는 정밀 분쇄.

FRITSCH 듀얼 분쇄 시스템 종합 대시보드

기능 분류	PULVERISETTE 1 조크러셔	PULVERISETTE 13 디스크 밀
분쇄 원리	압력 (Pressure)	전단력 (Shearing)
최대 투입 크기	95 mm	20 mm
최종 분쇄 입도	1 ~ 15 mm	0.1 ~ 12 mm
최대 처리량	200 kg/h	150 kg/h
장비 크기 및 무게	400x800x800 mm (205 kg)	440x870x400 mm (140 kg)

공식 파트너 네트워크 및 시스템 지원


경질 시료의 완벽한 분쇄 솔루션. 제품 상담부터 데모 테스트,
정밀한 기술 지원 및 유지보수까지 태명과학이 함께합니다.



LOCALIZATION: 태명과학 (FRITSCH 공식 파트너)



COMM LINK: 031-458-0025

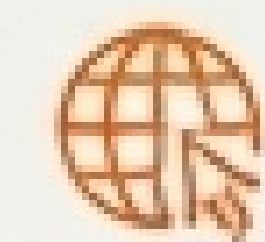

WEB DIRECTORY: www.fritsch.co.kr