

[SYSTEM_INIT_COMPLETE] // VER. 2.0



NEXT-GEN PARTICLE ANALYSIS

FRITSCH Sieve Shaker 시스템: 정밀 입도분포 측정의 새로운 기준




● STATUS: ONLINE

ELECTROMAGNETIC CORE: 압도적인 진동 제어 기술

[원리] : 전자석 구동 방식
(Electromagnetic Drive).



심하 진동(Vertical Oscillation)을 통한
원벽하고 균일한 Sieving 메커니즘.

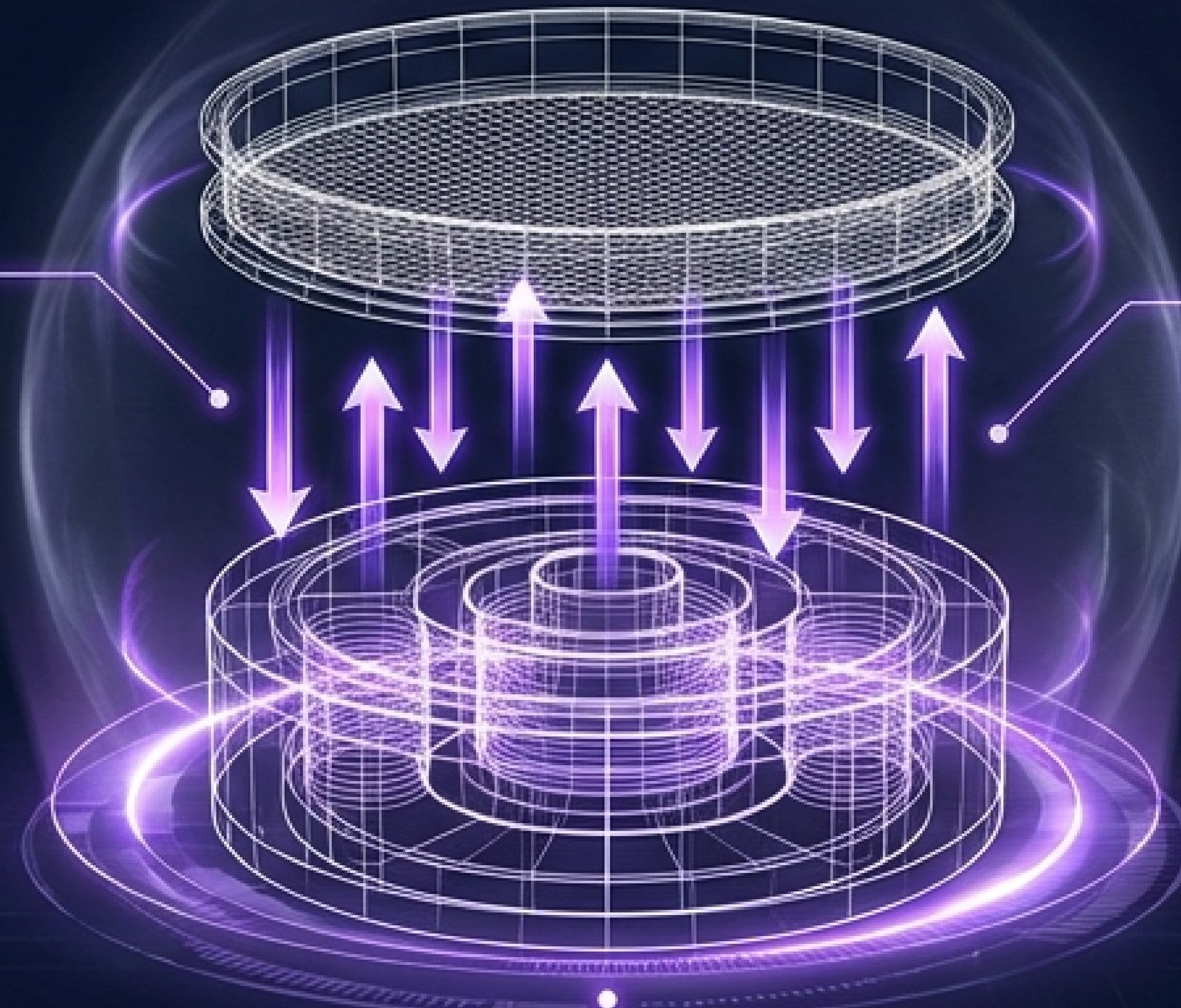

[제어] : 자동 진폭 제어
(Automatic Amplitude Control).

시료의 상태나 양에 상관없이 설정된
진폭을 지속적으로 유지하여
최상의 제현성 확보.




[신뢰성] :

ISO 9001 Quality Management 인증 획득.
오차 없는 정밀한 입도분석 데이터 제공.



MULTI-LAYER ANALYSIS PROTOCOL

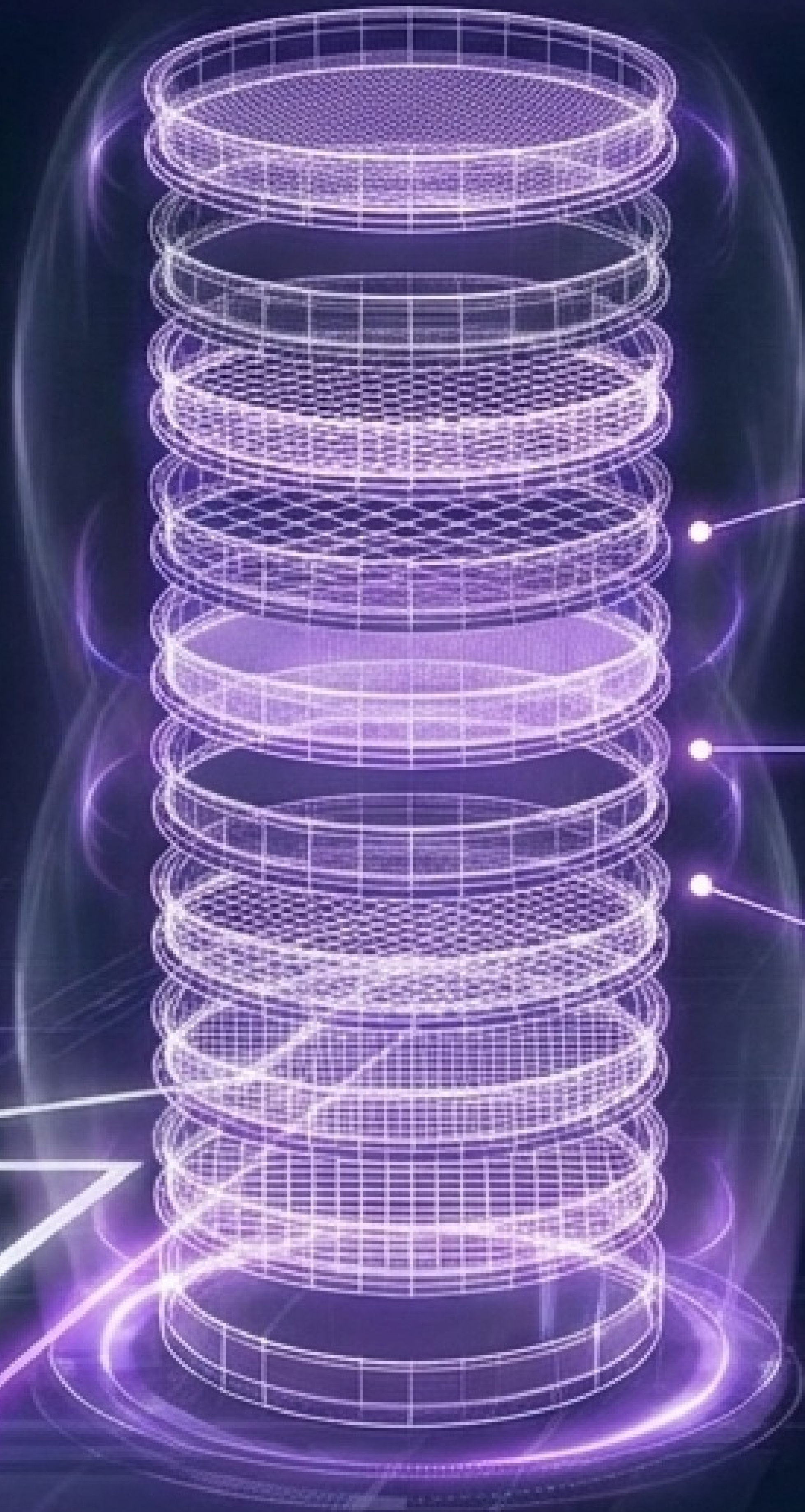

MAX CAPACITY

한 번에 최대 10개까지 Sieve 장착 가능
(단일 구동으로 다양한 입도 범위 등시 분석).



COMPATIBILITY

다양한 Sieve 직경 완벽 호환.
국산 Sieve(75mm, 203mm 규격) 역시
별도의 어댑터 없이 직접 장착 가능.



MODES

건식(Dry) 및 습식(Wet) 분석 완벽 지원.

DEVICE 01 // ANALYSETTE 3 PRO

정밀 분석을 위한 마이크로-프리시전 시스템 (Vibratory Sieve Shaker)




분석 범위 (건식): 20 μm ~ 63 mm

분석 범위 (습식): 20 μm ~ 10 mm

진폭 제어 0.1 ~ 3.0 mm (Automatic)

최대 적재량 3 kg



디바이스 스펙 370 x 400 x 200 mm / 21 kg

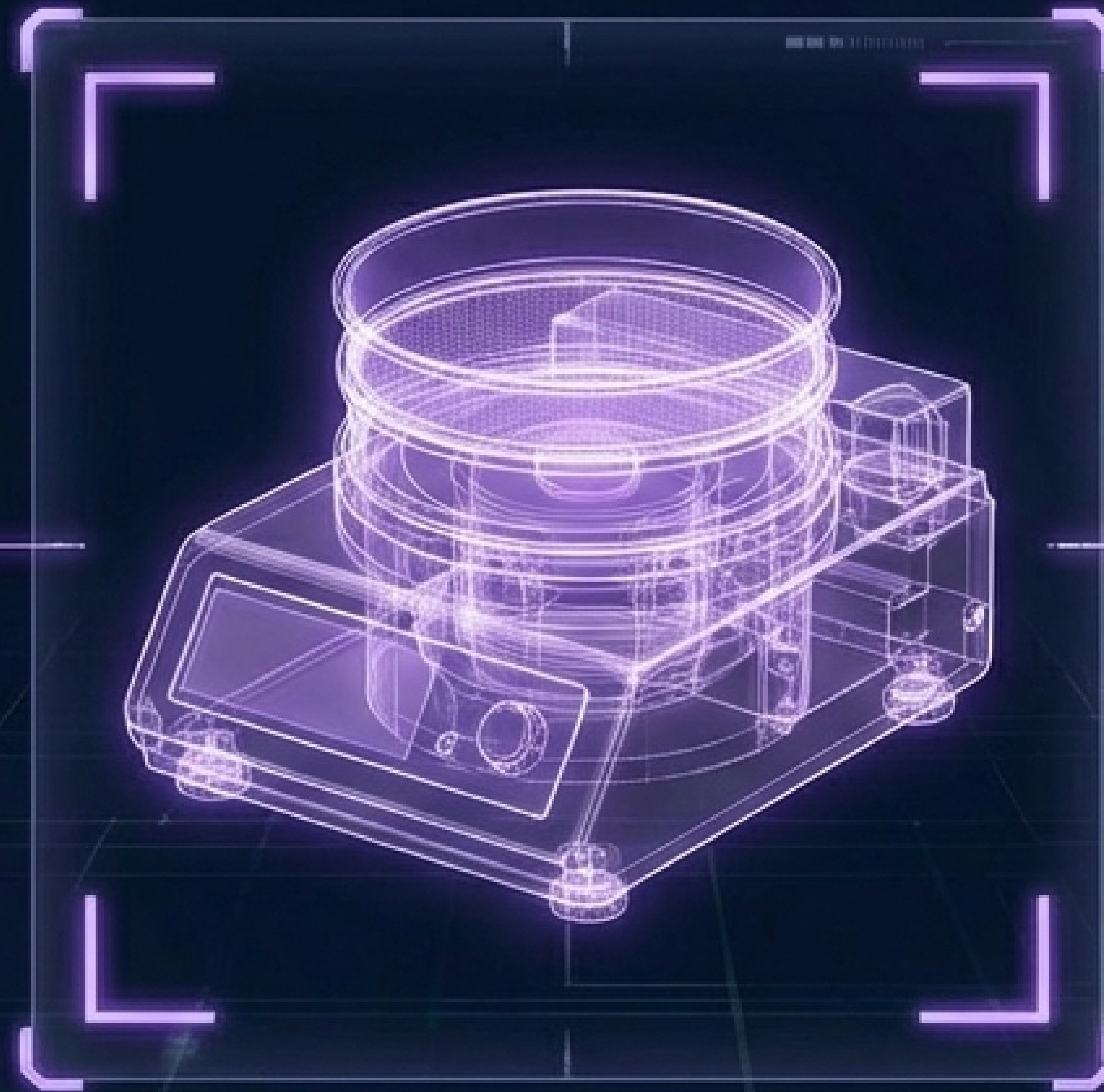

Micro-sieving 모드 장착 시
5 μm ~ 100 μm
극한의 정밀 분석 가능
(20 μm 이하 전용).

SYSTEM MODULARITY: 분쇄기로의 전환

ANALYSETTE 3 PRO는 단순한 체 진동기를 넘어, 액세서리 교체를 통해 강력한 초미세 분쇄기(Vibratory Micro Mill - Pulverisette 0)로 진화합니다.

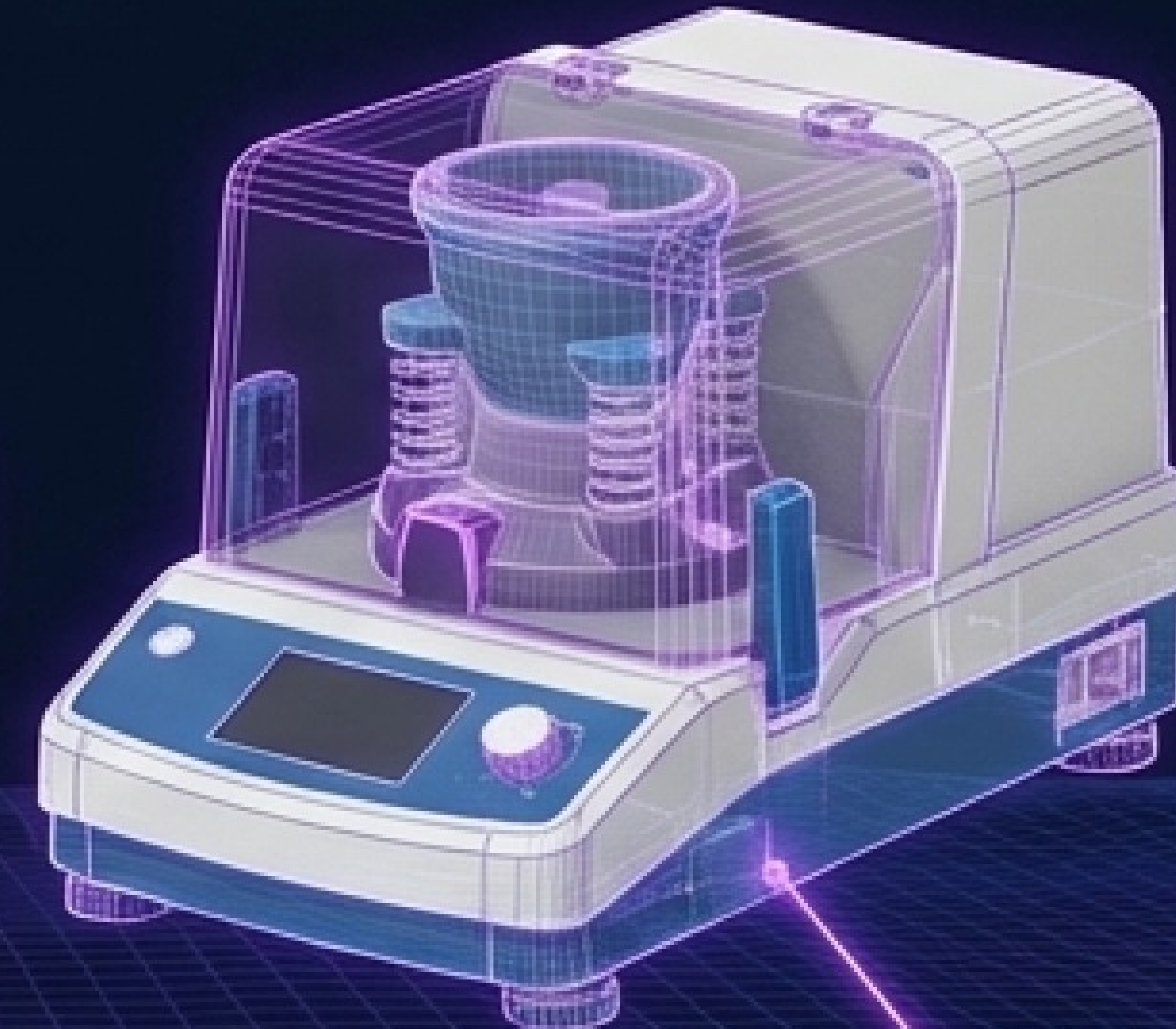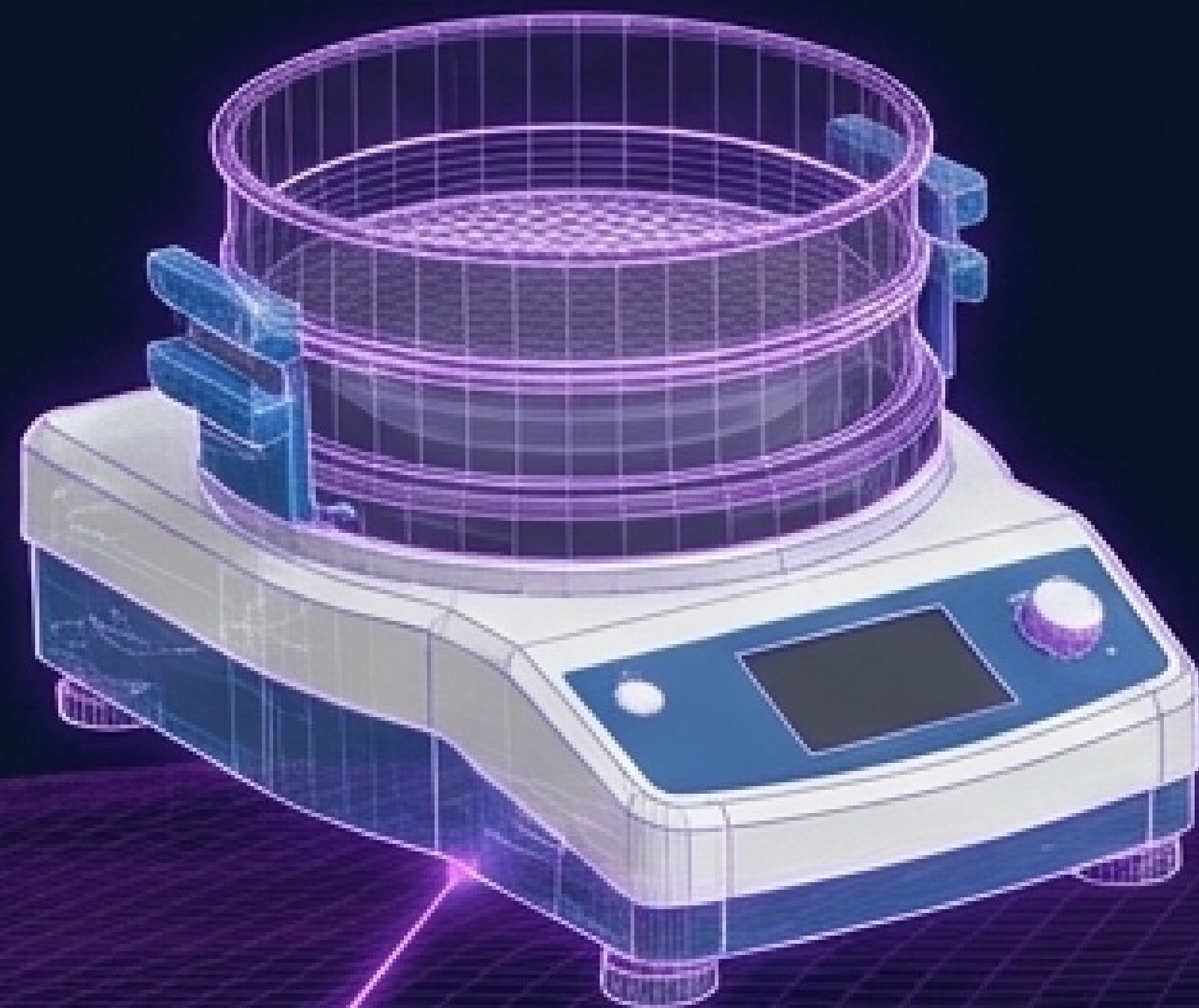

CONVERSION

- 진동 체분석기에서 진동 마이크로 밀로 완벽 전환.

CAPACITY

- 최대 10 ml 샘플 정밀 분쇄.

MATERIAL

- 실험 목적에 맞춘 다양한 재질의 Grinding bowl 선택 가능.

DEVICE 02 // ANALYSETTE 18

대용량 시료 처리를 위한 헤비 듀티 분석 플랫폼 (Heavy Duty Analytical Sieve Shaker)

분석 범위 (건식): 20 μ m ~ 125 mm

진폭 제어 0.1 ~ 2.0 mm (Automatic)

Sieve 규격 200, 290, 300, 315, 350, 400,
450 mm 대형 체 완벽 지원.

스택 한계점 최대 Sieve 12개 장착 (65mm 높이
기준) / 최대 스택 높이 845 mm.

디바이스 스펙 580 x 590 x 1,300 mm / 135 kg



MAX LOAD 42 kg:
대규모 산업용 시료 및
무거운 광물/토양 샘플의
효과적인 일괄 분석.

SYSTEM DIAGNOSTICS: 매트릭스 비교 분석

	A3 PRO	A18
타겟 영역	연구실 정밀 마이크로 분석	산업용 대용량 매크로 분석
분석 범위	20 μ m ~ 63 mm (건식)	20 μ m ~ 125 mm (건식)
최대 적재 무게	3 kg	42 kg
Sieve 직경 지원	75, 100, 203 mm	200 ~ 450 mm
특수 기능	습식 분석, 마이크로 밀 전환	Heavy Duty 845mm 스택


두 시스템 모두 자동 진폭 제어(Automatic Amplitude Control)를 통해
환경에 흔들리지 않는 절대적인 재현성을 보장합니다.

ADVANCED UX: 스마트 컨트롤 인터페이스



MEMORY PROTOCOL

실험 조건 저장 기능.
최대 9개까지 맞춤형
프로그램을 메모리에
저장하여 완벽한
재현성 확보.

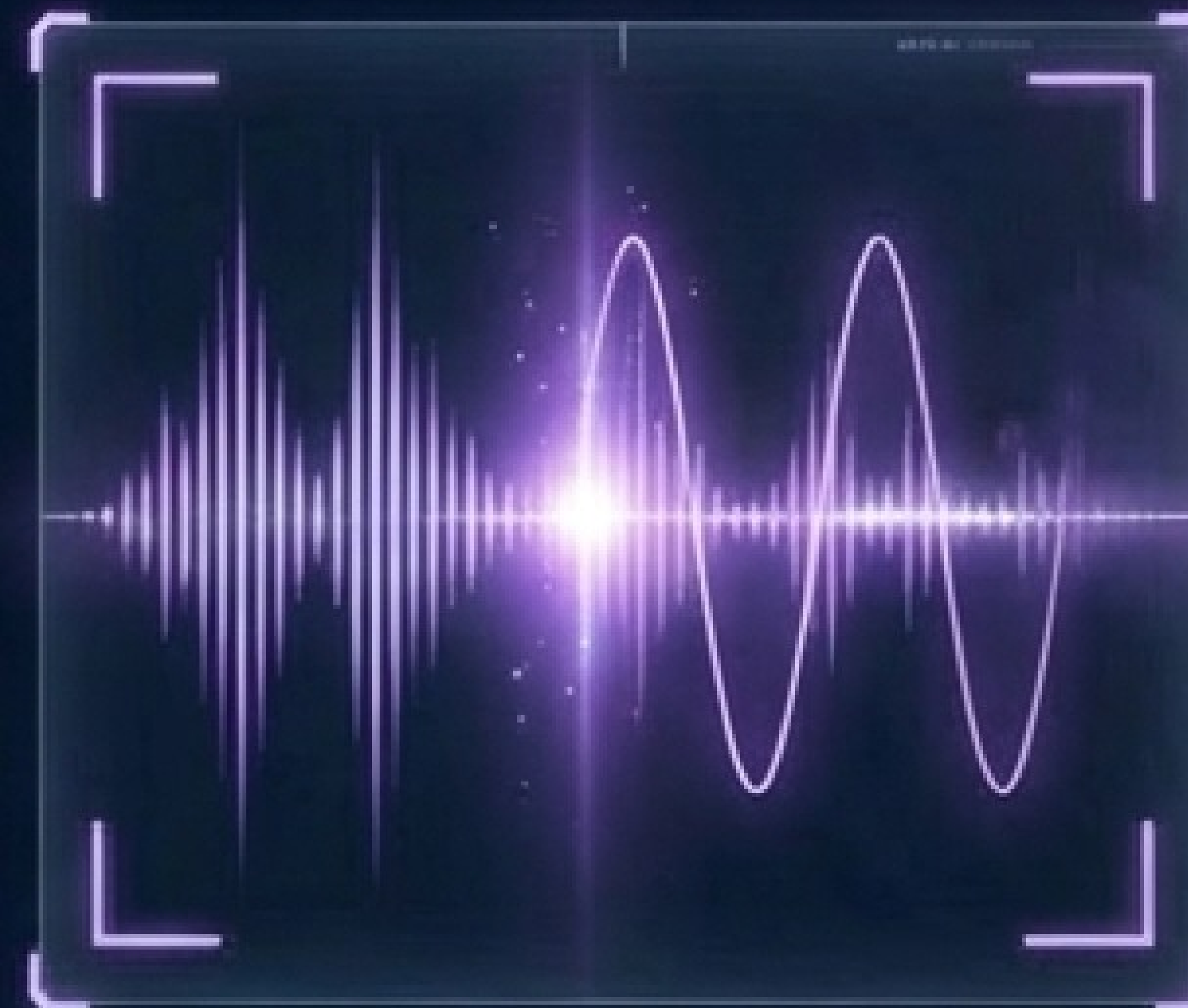

PULSE ALGORITHM

Pulse (Pause) 기능 탑재.
진동 간 정지 시간을 부여하여,
가볍고 뭉치기 쉬운 샘플의
분리 효율을 극대화.



PRECISION TIMING

직관적인 분석 시간 조절 및
0.1~3.0mm 범위의
미세 진폭 세팅 가능.

NETWORK CONNECTION ESTABLISHED

FRITSCH 공식 파트너 태명과학. 제품 상담, 데모 테스트,
기술 지원 및 유지보수 서비스 네트워크에 연결하십시오.

```
> ORGANIZATION: 태명과학 (Taemyung Scientific)
> TELEPHONE_LINK: 031-458-0025
> WEB_PORTAL: www.fritsch.co.kr
> STATUS: 대기 중 (Awaiting your command) █
```