


SYSTEM.ONLINE // V.1.0

첨단 시료 전처리 시스템: FRITSCH Cutting Mill

연질 및 섬유질 시료를 위한
궁극의 고속 절삭 솔루션

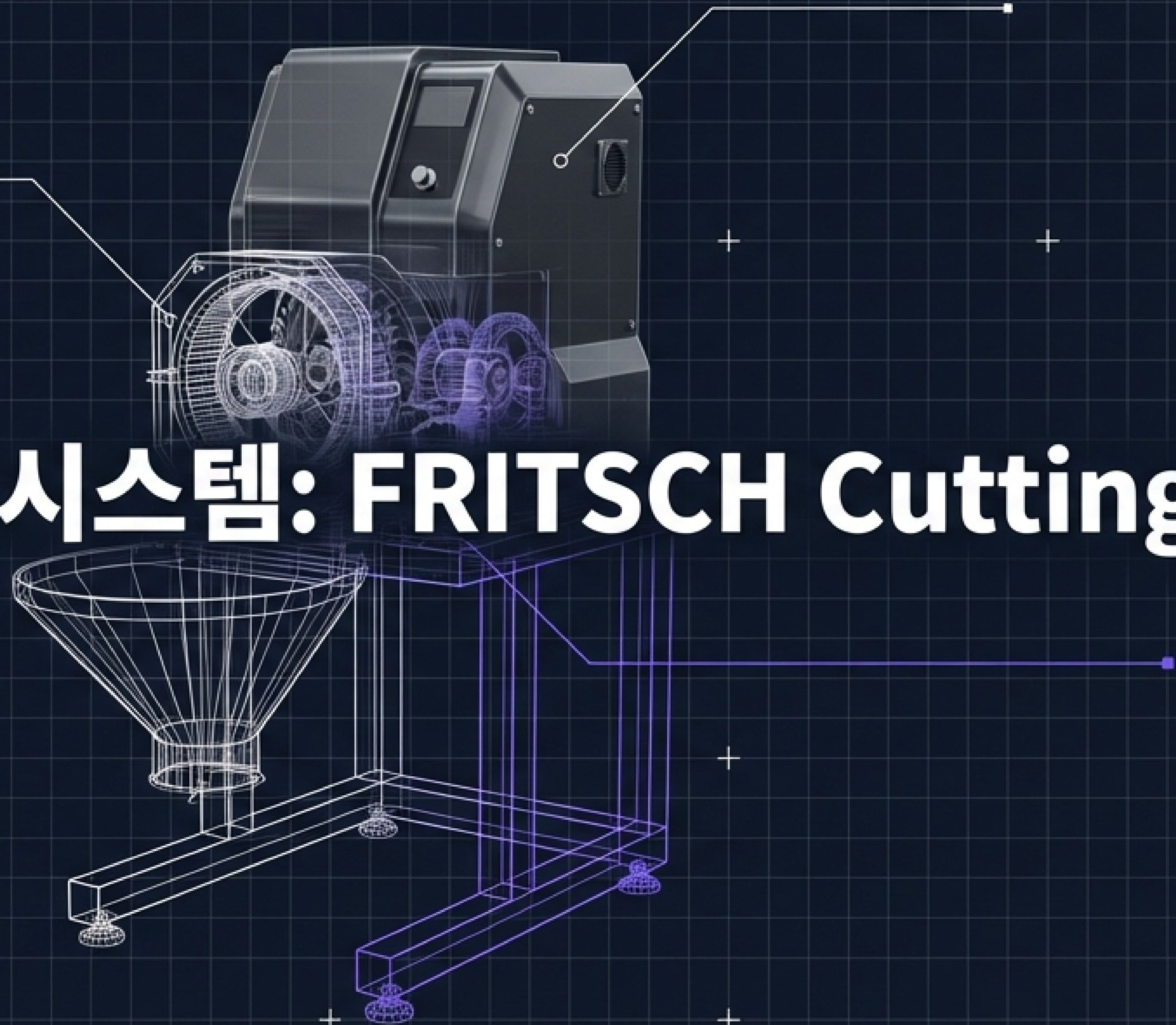


[INITIATING VIRTUAL SHOWROOM]

Core Mechanism: 고속 회전 절삭 엔진

Pretendard Bold	Regular
작동 원리	고속 회전하는 로터의 강력한 물리적 절삭력
Roboto Mono	Regular
대상 시료	연질 (Soft) 및 섬유질 (Fibrous) 들질

Pretendard Bold	Roboto Mono
정밀 속도 제어	300 ~ 3,000 rpm (PULVERISETTE 19 기준)
Roboto Mono	Roboto Mono
로터 주변 속도	1.57 ~ 15.7 m/s 극대화된 절삭 에너지

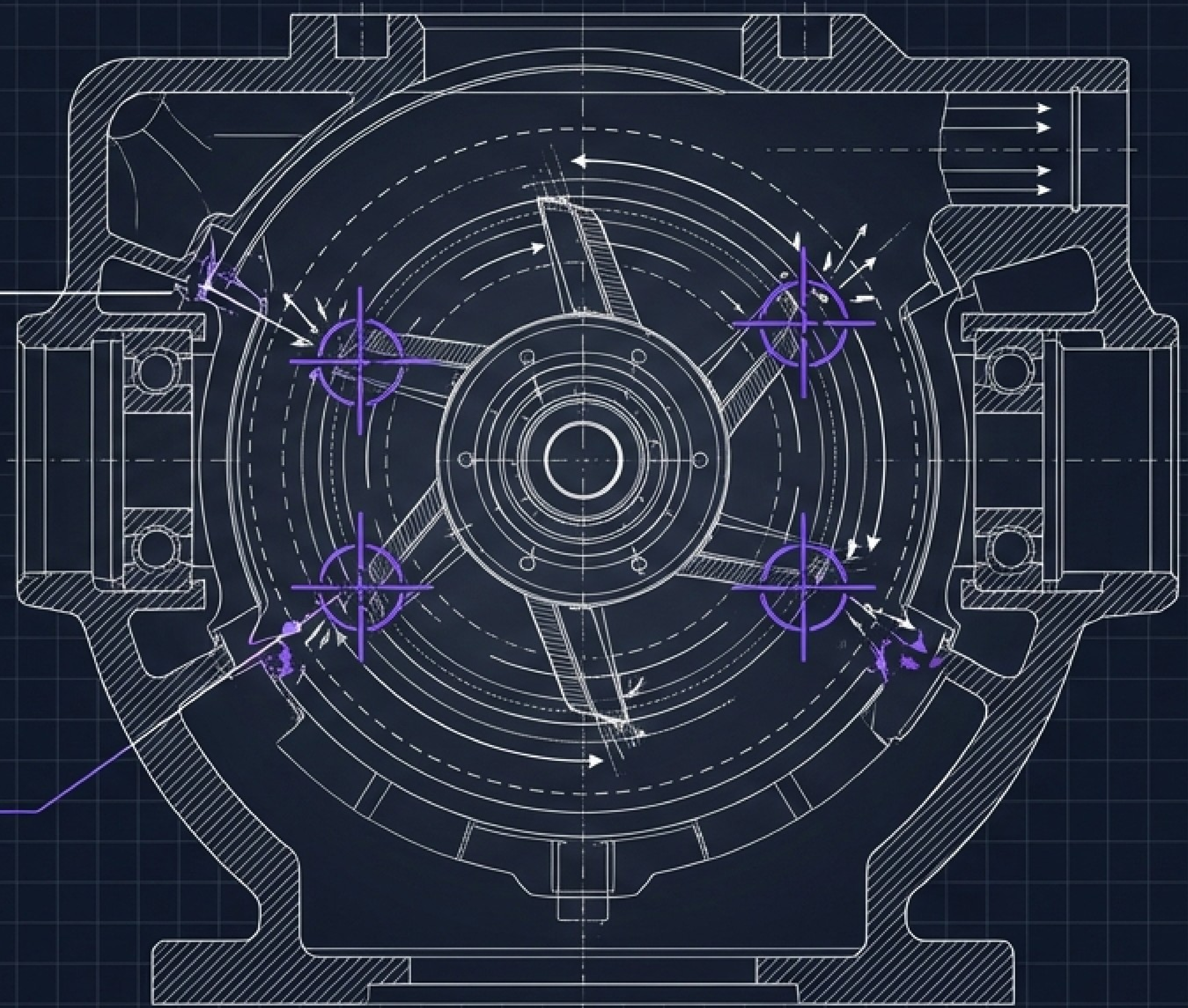

Modular Architecture: 맞춤형 로터 시스템



Standard rotor with V-cutting

Target Material: 펠릿 (Pellets),
과립 (Granules)



[OPTIMAL FOR GRANULAR STRUCTURES]



Straight cutting edges

Target Material: 목재 (Wood), 식물
(Plants), 섬유질 (길이가 긴 시트)

[OPTIMAL FOR LONG FIBERS]

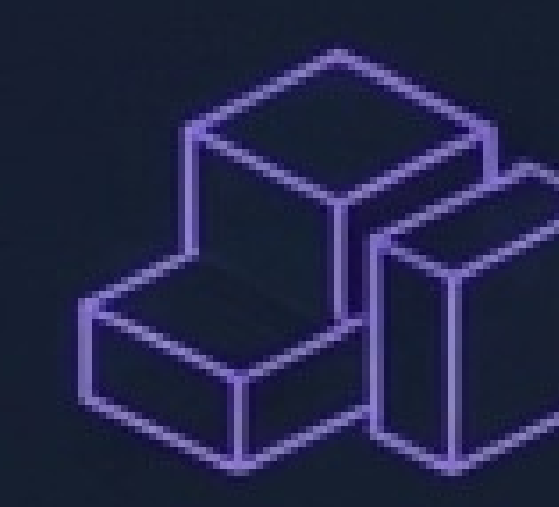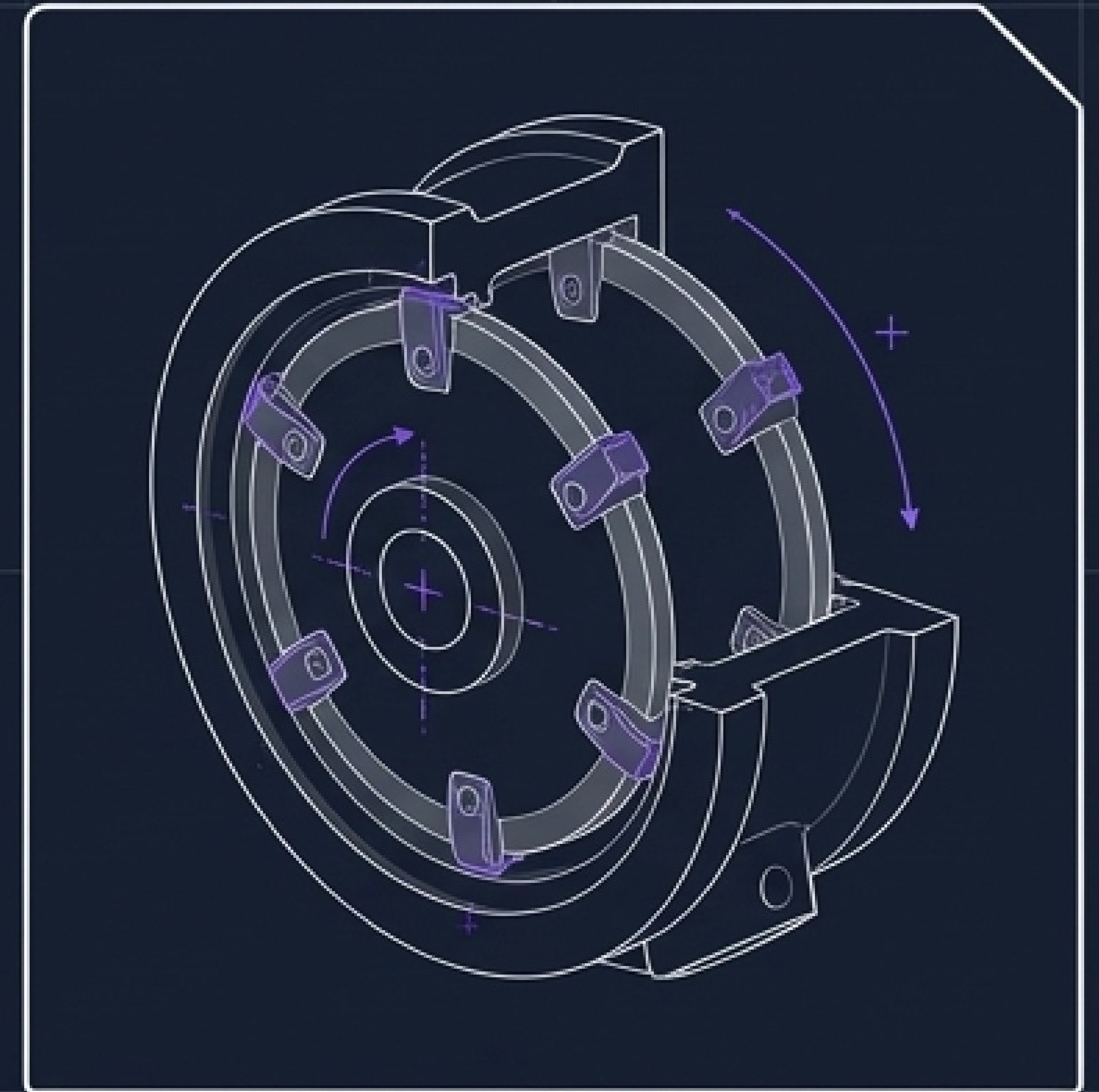


Disk milling cutter rotor

Target Material: 보드 (Boards),
칩 (Chips), 고강도 시트

[OPTIMAL FOR HARD/RESISTANT MATERIALS]

Precision Control: Sieve Cassette 입도 조절 시스템

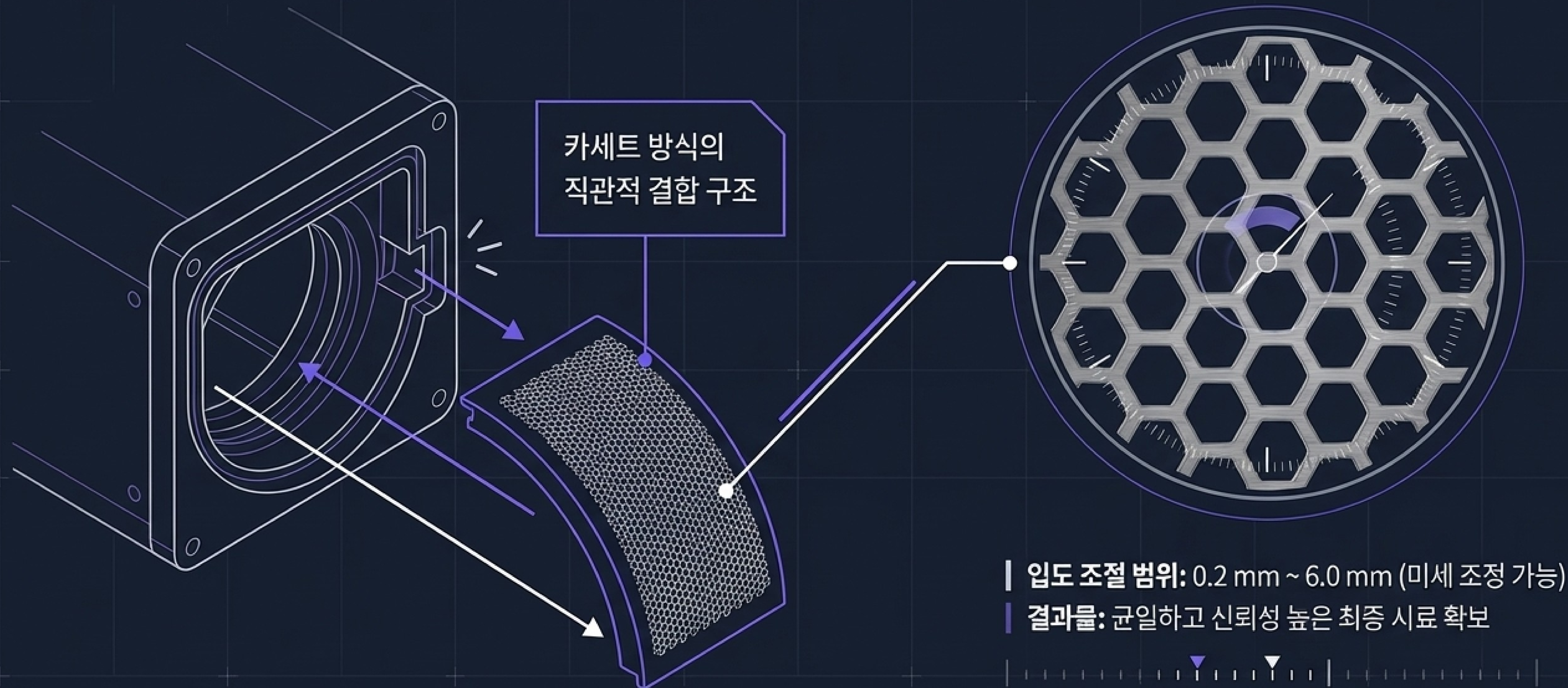

[PARTICLE SIZE DISTRIBUTION: STABLE] // [CALIBRATION: ACTIVE]


The Universal Standard: PULVERISETTE 19

최대 투입 크기

40 x 80 mm

물리적 제원

400 x 790 x 560 mm / 60 kg

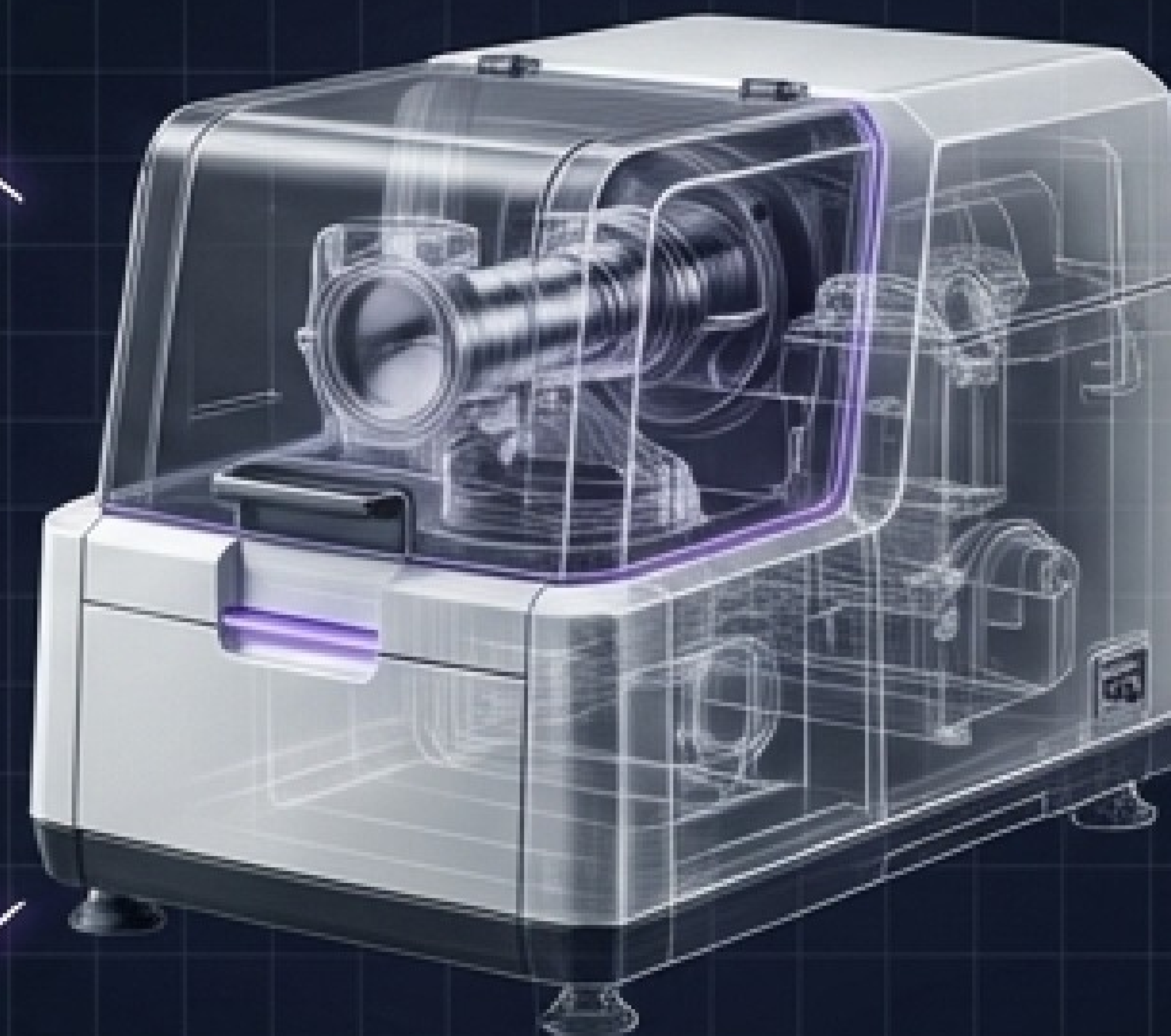

최대 처리량

60 L/h (배치 및 연속 투입 완벽 지원)


절삭 도구 재질 옵션

- ☒ Steel (스틸)
- ☒ Tungsten Carbide (텅스텐 카바이드)
- ☒ Chromium-free (크롬 프리 - 중금속 오염 방지)


Heavy-Duty Processing: PULVERISETTE 19 L

대용량 시료의 강력하고 압도적인 전처리


최대 투입 크기: 120 x 85 mm [MAX CAPACITY GAINED]

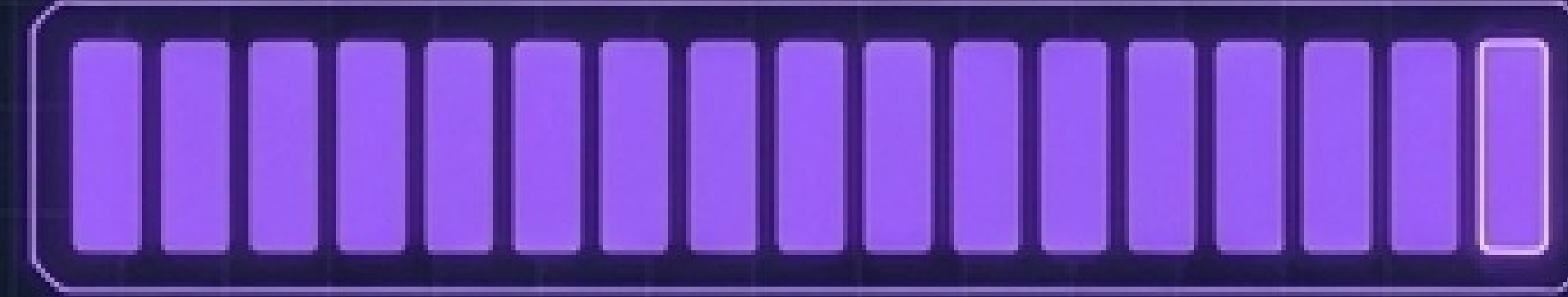

Sieve Insert 범위: 1 mm ~ 10 mm

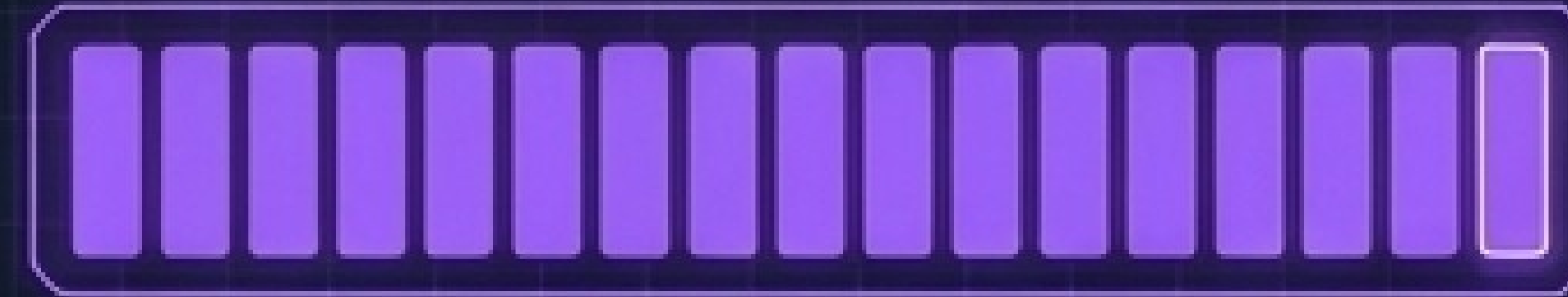

최대 처리량: 85 L/h [POWER SURGE DETECTED]

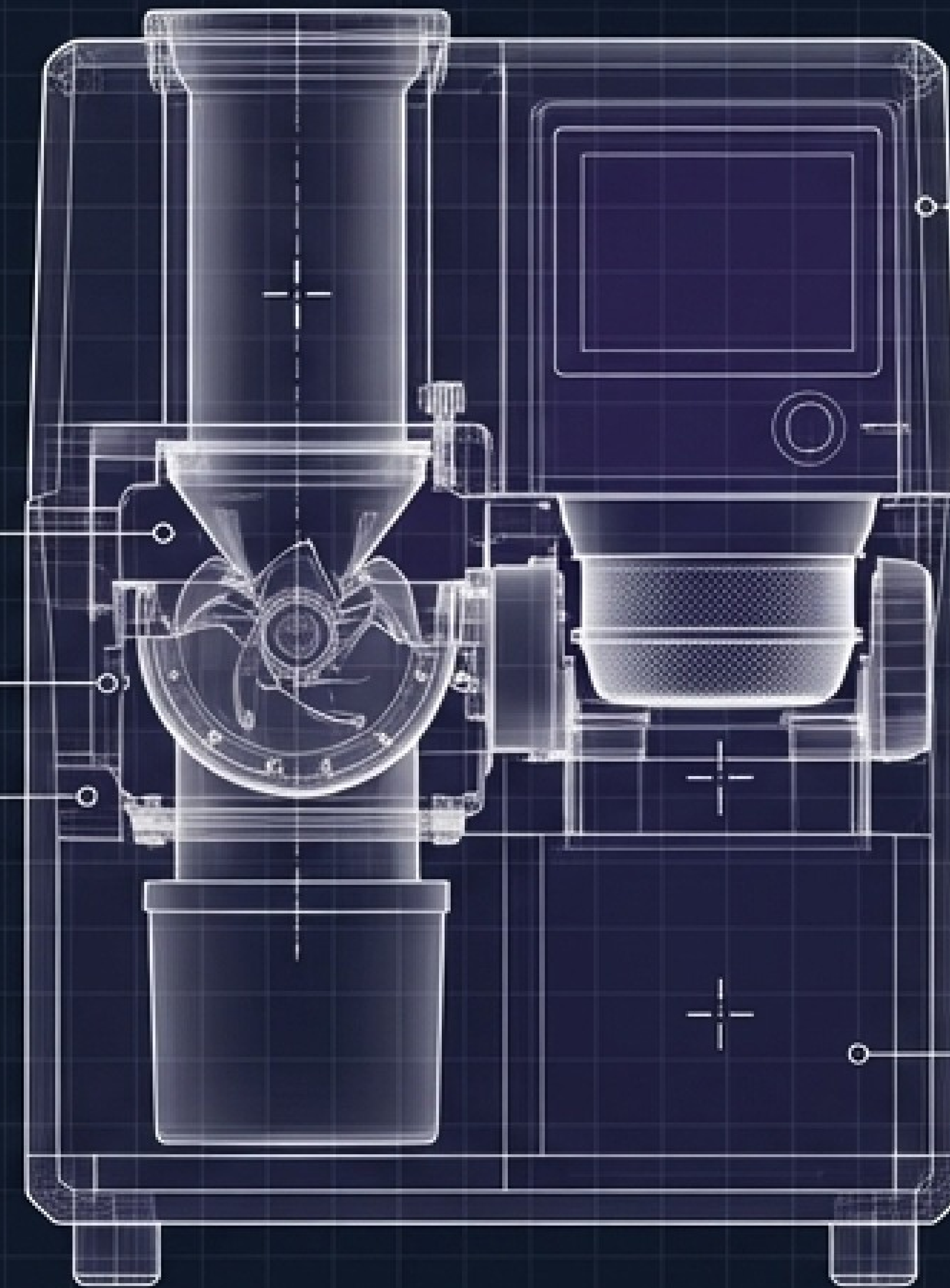


물리적 제원:

450 x 650 x 630 mm / 88 kg

절삭 도구 재질:


스틸 / 텅스텐 카바이드 / 크롬 프리

Utility Form Factors: 특수 목적 최적화 모델

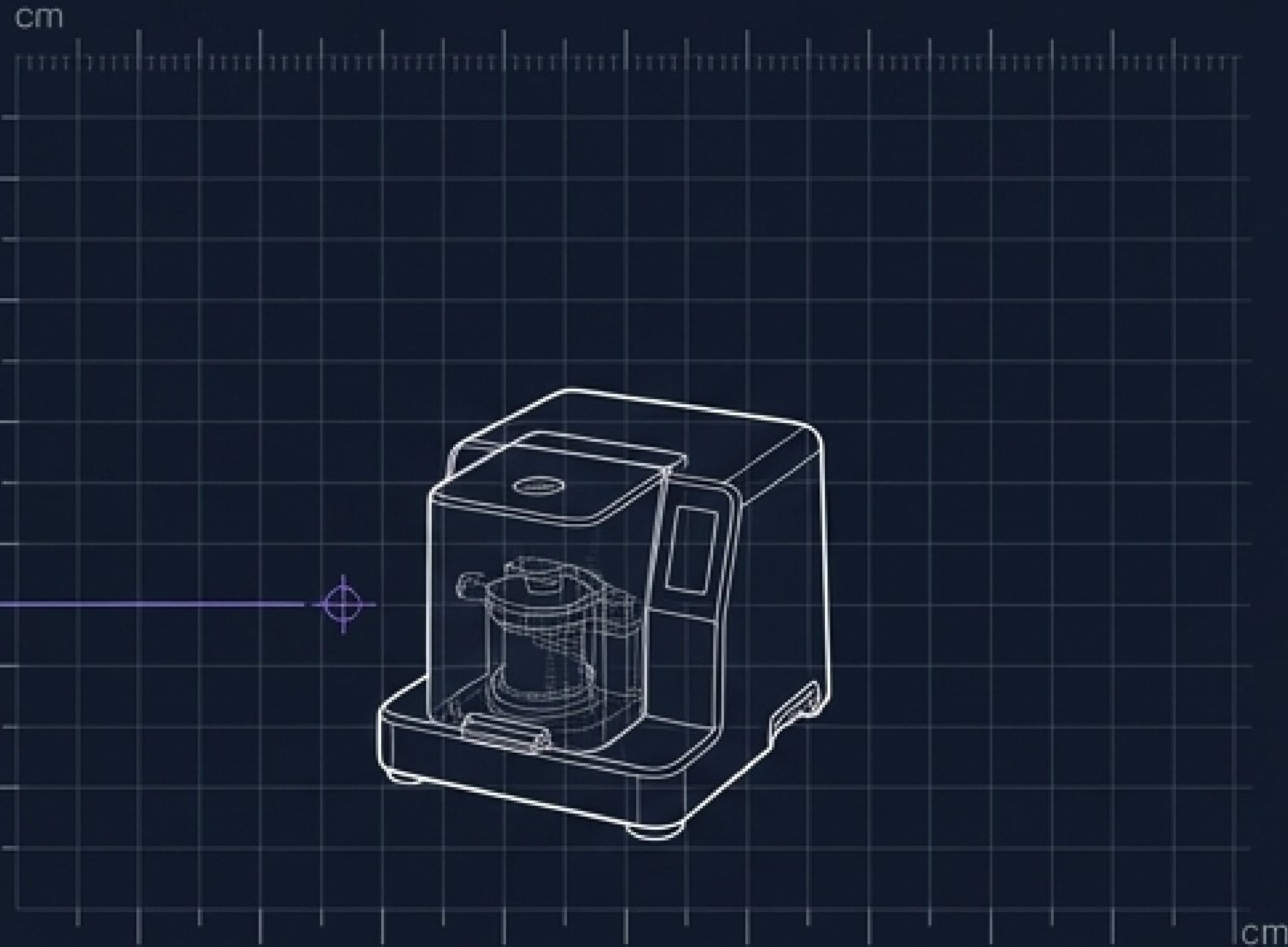

PULVERISETTE 29 (Mini Cutting Mill)

용도	테이블탑 소량 시료 전처리
투입 직경 / 처리량	최대 13 mm / 100 ml/h
RPM	500 ~ 6,000 rpm (초고속 미세 분쇄)
제원	370 x 300 x 300 mm / 15 kg

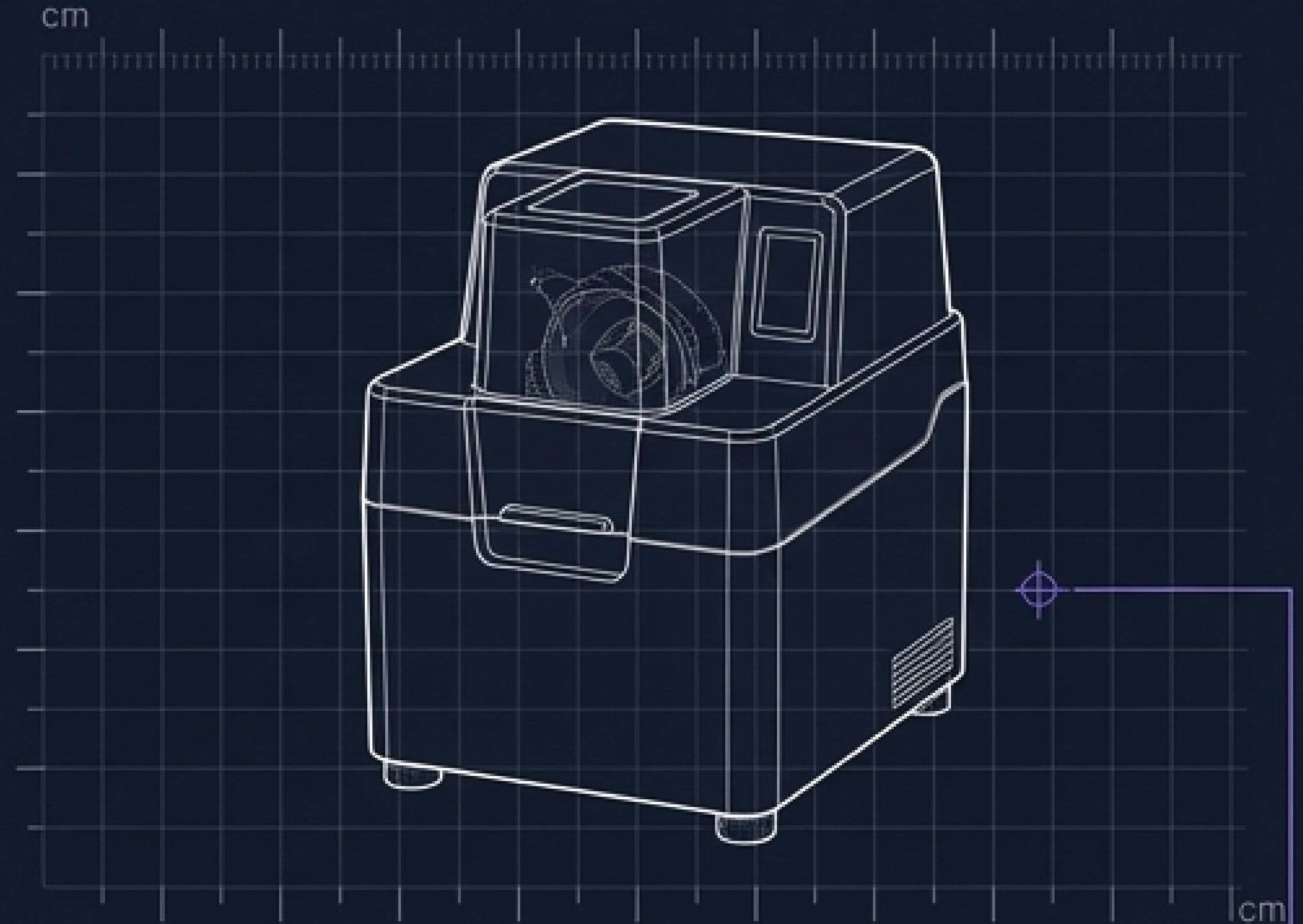

PULVERISETTE 15 (General Cutting Mill)

용도	경제적인 범용 표준 전처리
투입 크기 / 처리량	최대 40 x 70 mm / 50 L/h
RPM	2,800 or 3,400 rpm (고정일 스탠다드)
제원	420 x 480 x 690 mm / 42 kg

Synthesis: 모델별 종합 스펙트럼 비교 (Digital Grid)

	Mini (P29)	General (P15)	Universal (P19)	Power (P19 L)
최대 투입	13 mm	40x70 mm	40x80 mm	120x85 mm
최대 처리량	100 ml/h	50 L/h	60 L/h	85 L/h
RPM 범위	500-6000	2800/3400	300-3000	(Power Optimized)
무게	15 kg (초경량)	42 kg	60 kg	88 kg

Applied Science: 산업별 무한한 확장성

플라스틱 & 섬유 (Plastics & Textiles)

PVC, PP, PE, 고무, 직물

농업 & 임업 (Agriculture)

목재, 잎, 뿌리, 곡물, 옥수수, 토탄

환경 (Environment)

종이, 금속 프리 폐기물, 가정 폐기물

제약 (Pharmaceuticals)

정제 (Tablets), 과립, 제약 원료

바이오 & 식품 등 (Bio, Food & Misc)

쌀, 맥아, 파스타, 스파이스 / RoHS
분석용 전자부품, 유리

System Integration & Support



[MAINTENANCE]

완벽하게 간편한 분해 및 조립 구조 (세척 용이성 극대화)

[CRYO-MILLING]

액체질소(Liquid N2) 동결분쇄 완벽 지원

FRITSCH 공식 파트너: 태명과학

전문적인 제품 상담, 데모 테스트, 맞춤형 유지보수 지원

TEL: 031-458-0025

WEB: www.fritsch.co.kr