


[SYS_READY] //
INITIATING VIRTUAL LAB...

FRITSCH Laboratory Sample Test


성공적인 공정 구축을 위한 최적의 시료 테스트 솔루션

SYSTEM ACTIVE_

ERROR: PREDICTION FAILED

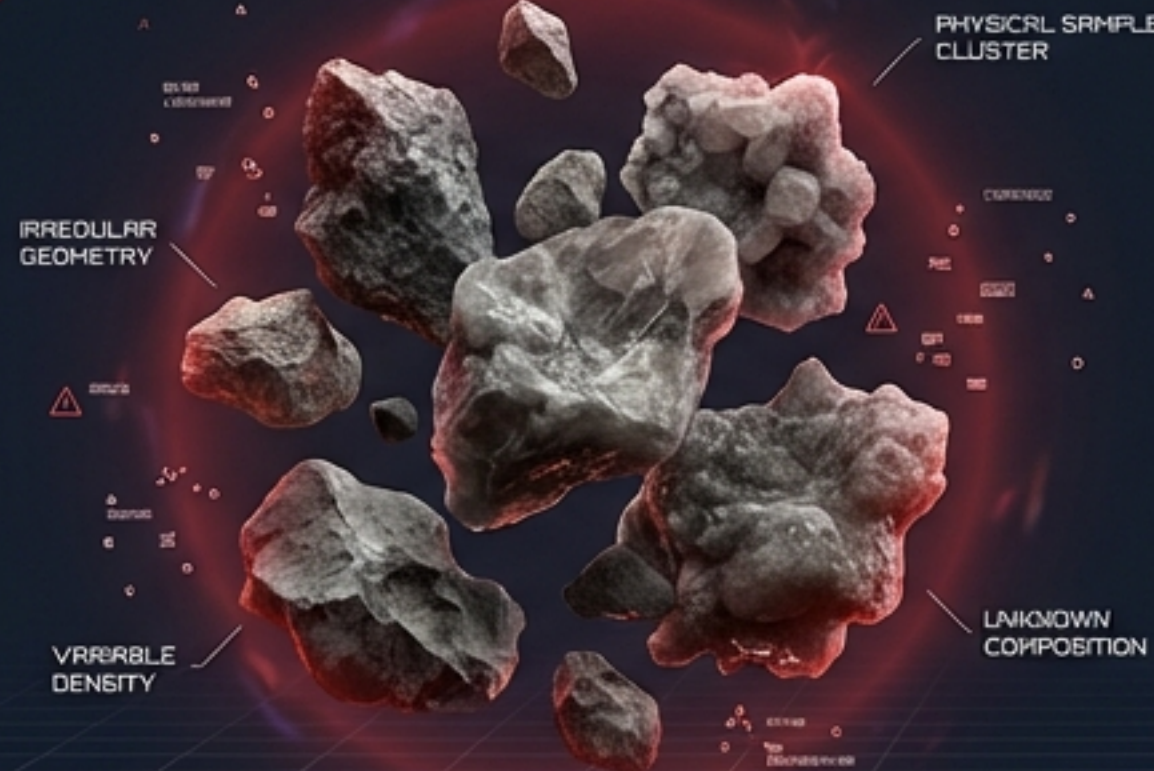

스펙을 넘어선 실제 시료의 복잡성
경도, 수분 함량, 취성, 섬유질... 모든 시료는 고유한 물리적 특성을 가집니다.
단순한 카탈로그 스펙만으로는 실제 분쇄 결과를 완벽히 예측할 수 없습니다.
검증되지 않은 추정은 곧 대규모 장비 투자의 치명적 리스크로 직결됩니다.

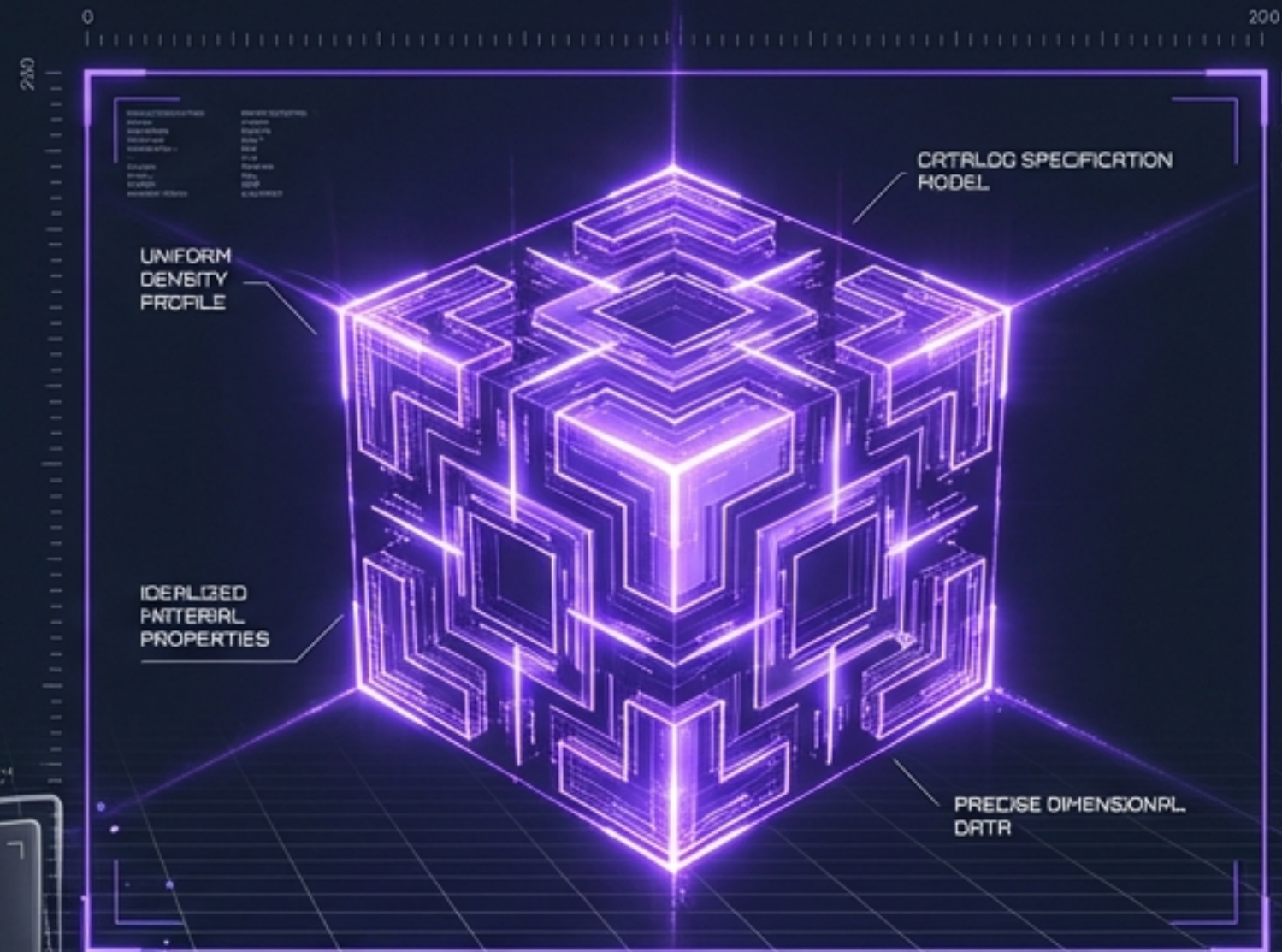

SOLUTION PROTOCOL ENGAGED

FRITSCH
TEST SERVICE


리스크 제로를 향한 사전 검증

실제 분쇄 및 분석 결과 사전 확인

시료별 최적의 장비 및 운전 파라미터 도출

성공적인 공정 설계 및 장비 도입
리스크 원천 차단

PHASE 01 - 02 : INGEST & ANALYZE

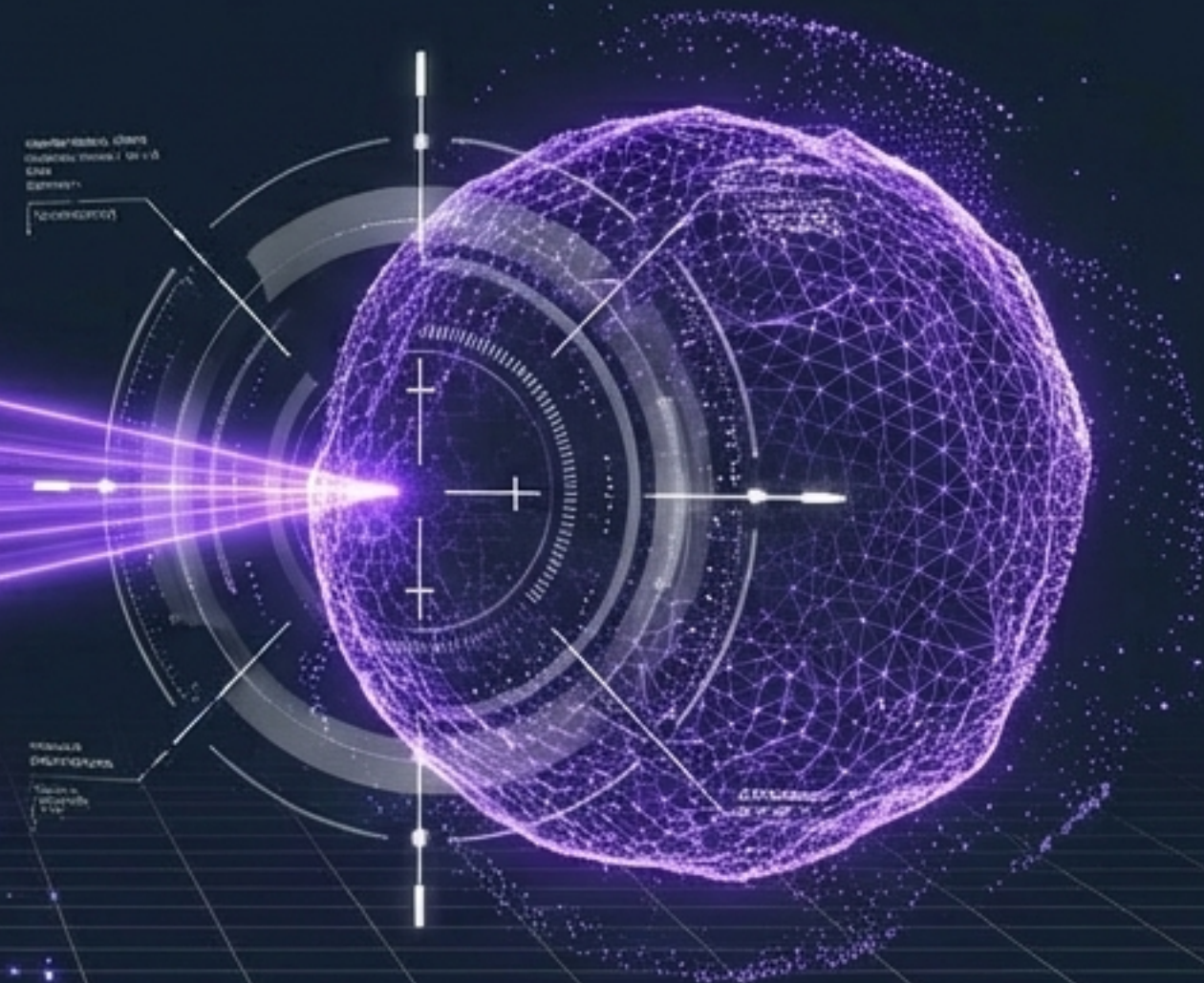

01 접수 및 02 특성 분석

목표 분쇄 입도와 처리 용량 요구사항을 시스템에 수집합니다.
전문 엔지니어가 시료의 물리적 특성을 정밀하게 교차 분석하여,
테스트에 가장 적합한 최적의 장비 라인업을 1차 선정합니다.


PHASE 03 - 04 : EXECUTE & MEASURE

3

4

03 분쇄 테스트 및 04 데이터 측정

속도, 시간, 볼 크기 등 다양한 변수를 적용하여
시뮬레이션 분쇄를 실행합니다.
분쇄 전후의 정밀한 입도 분포, 소요 시간, 에너지 소비량을
실시간으로 측정하여 최적의 파라미터를 확립합니다.

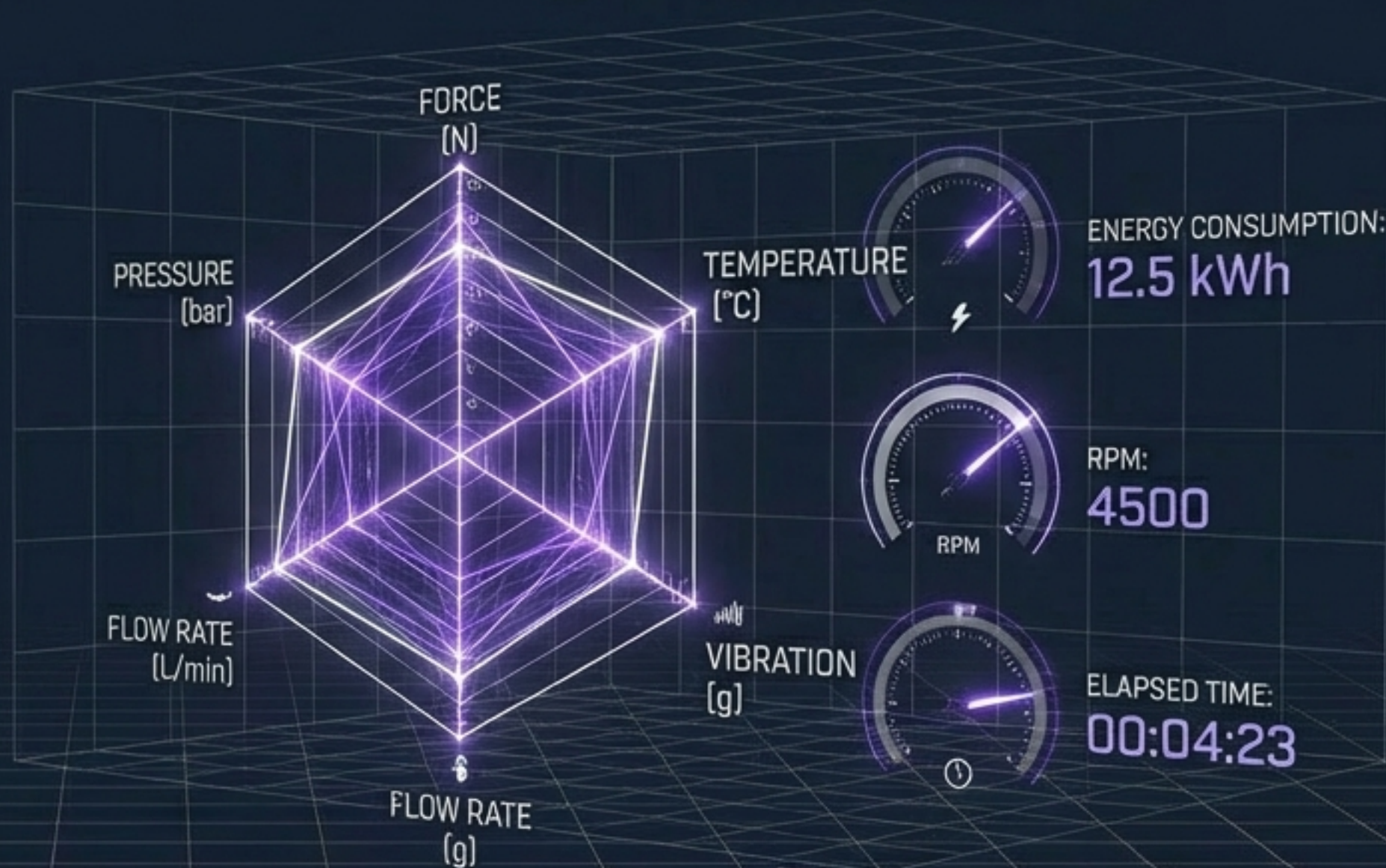

T+ 00:04:23...

PHASE 05 : REPORT GENERATION

05 결과 리포트 및 스케일업

측정된 핵심 데이터를 바탕으로, 추천 장비 사양과 최적 운전 조건이 포함된 상세 엔지니어링 리포트를 제공합니다.

랩 스케일의 성공적인 결과를 실제 양산 공정에 적용하기 위한 스케일업(Scale-up) 프로토콜도 함께 검토합니다.



AR UI

SYSTEM TIME: 88:48:52 UTC
CALIBRATION: ACTIVE

AVAILABLE HARDWARE FOR TEST


분쇄부터 분석까지 통합 테스트 지원



Mills (고에너지 볼 밀, 진동 볼 밀, 로터 밀 등)



Crushers (조크러셔, 디스크 밀 등)

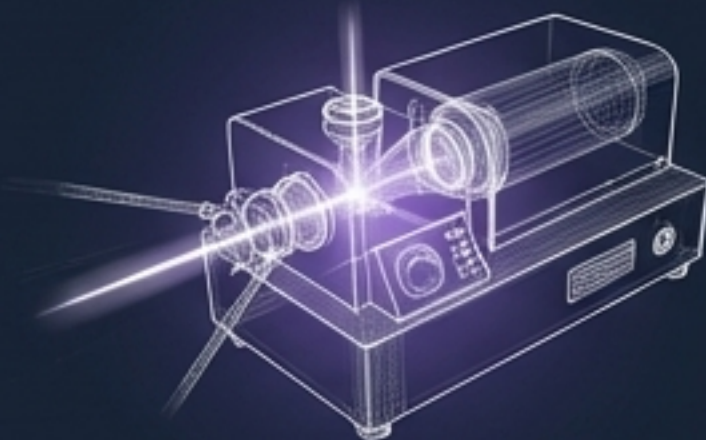

Analyzers (레이저 및 이미지 입도분석기)



Sieve Shakers (진동 체분석기)



완벽한 입도 분석의 절대 기준

시료의 물리적 특성을 완벽히 파악하기 위한 첫걸음.
FRITSCH의 진동 체분석기 ANALYSETTE 시리즈는
미세한 마이크로 단위의 정밀 분석부터 대용량 하드코어 시료까지,
어떠한 타협도 없는 완벽한 분급 성능을 제공합니다.



정밀함의 한계를 넘다 (Vibratory Sieve Shaker)

자동 진폭 제어 시스템
(Automatic amplitude control)

정밀 마이크로 체분석
(Micro-sieving: 5 μm ~ 100 μm)

건식/습식 전천후 지원
(Dry: 20 μm ~ 63 mm / Wet: 20 μm ~ 10 mm)

최대 장착: 체 10개 (50 mm ht.) /
최대 하중: 3 kg



거대한 스케일, 압도적인 퍼포먼스 (Heavy Duty Analytical Sieve Shaker)

대용량 시료의 압도적 체분석
(Effective sieving of large quantity)

광범위 건식 체분석
(Dry sieving: 20 μ m ~ 125 mm)

거대한 체 직경 지원
(Sieve diameter up to 450 mm)

최대 장착: 체 12개 (65 mm ht.) /
최대 스택 하중: 42 kg



SYSTEM COMPARISON // SPECIFICATION MATRIX

타겟 시료 스케일에 따른 최적화 모델 선택 가이드

	 ANALYSETTE 3 PRO (정밀형)	 ANALYSETTE 18 (대용량형)
[Sieving Principle]	Vibrating (공통)	Vibrating (공통)
[Sieve Diameter]	75, 100, 203 mm	200 ~ 450 mm
[Max. Weight of Sieve Stack]	3 kg	42 kg (대용량)
[Dry Sieving Range]	20 μ m ~ 63 mm	20 μ m ~ 125 mm
[Special Mode]	Micro/Wet 지원	건식 대용량 전용

FRITSCH 시료 테스트가 창출하는 5대 가치



빠르고 직관적인 테스트 신청 프로세스

Step 1.


[요청]: 태양과학 컨택 및
테스트 전용 신청서 수령

Step 2.

[입력]: 목표 입도/처리량 데이터
기재 및 물리적 시료 발송

Step 3.

[완료]: 약 1~2주 내 최적화 데이
터가 담긴 상세 결과 리포트 수신

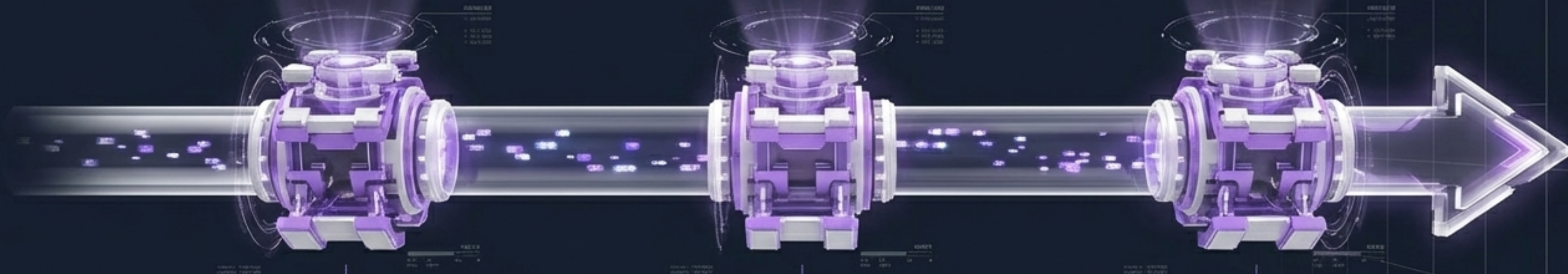

Step 1.

[요청]: 태양과학 컨택 및
테스트 전용 신청서 수령

Step 2.

[입력]: 목표 입도/처리량 데이
터 기재 및 물리적 시료 발송

Step 3.

[완료]: 약 1~2주 내 최적화 데이
터가 담긴 상세 결과 리포트 수신

MISSION ACCOMPLISHED // THE FOUNDATION OF SUCCESS

완벽한 공정 구축의 시작,

완벽한 공정 구축의 시작,
실제 시료 테스트로 증명된 데이터만을 믿으십시오.

FRITSCH Laboratory Sample Test는 추측을 배제하고 오직 최적의 장비와
검증된 파라미터만을 제공하여, 귀사의 비즈니스에 흔들림 없는 확실성을 부여합니다.

태명과학 (FRITSCH 공식 한국 파트너)

무료 시료 테스트 접수, 정밀 제품 상담, 기술 지원 및 유지보수

TEL : 031-458-0025
WEB : www.fritsch.co.kr

[DISCONNECTING... SECURE CONNECTION CLOSED]

