


나노 분쇄의 글로벌 스탠다드: FRITSCH High-Energy Ball Mill


극한의 정밀도, 95G가 만들어내는 입도 제어의 혁신

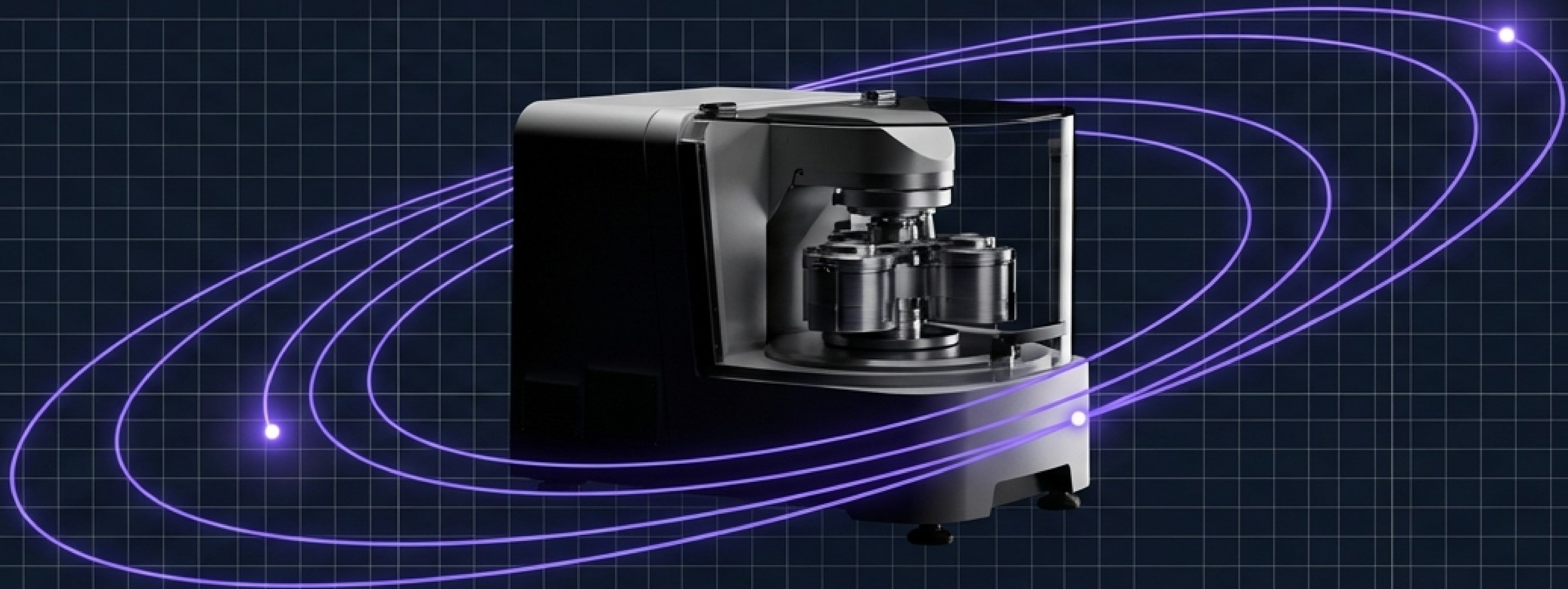


완벽한 역학의 조화: 공전(Revolution)과 자전(Rotation)의 시너지

보울과 볼 사이, 그리고
볼 상호 간에 발생하는
강력한 복합 충격 에너지.

보울과 볼 사이,
그리고 볼 상호 간에 발생하는
강력한 복합 충격 에너지.

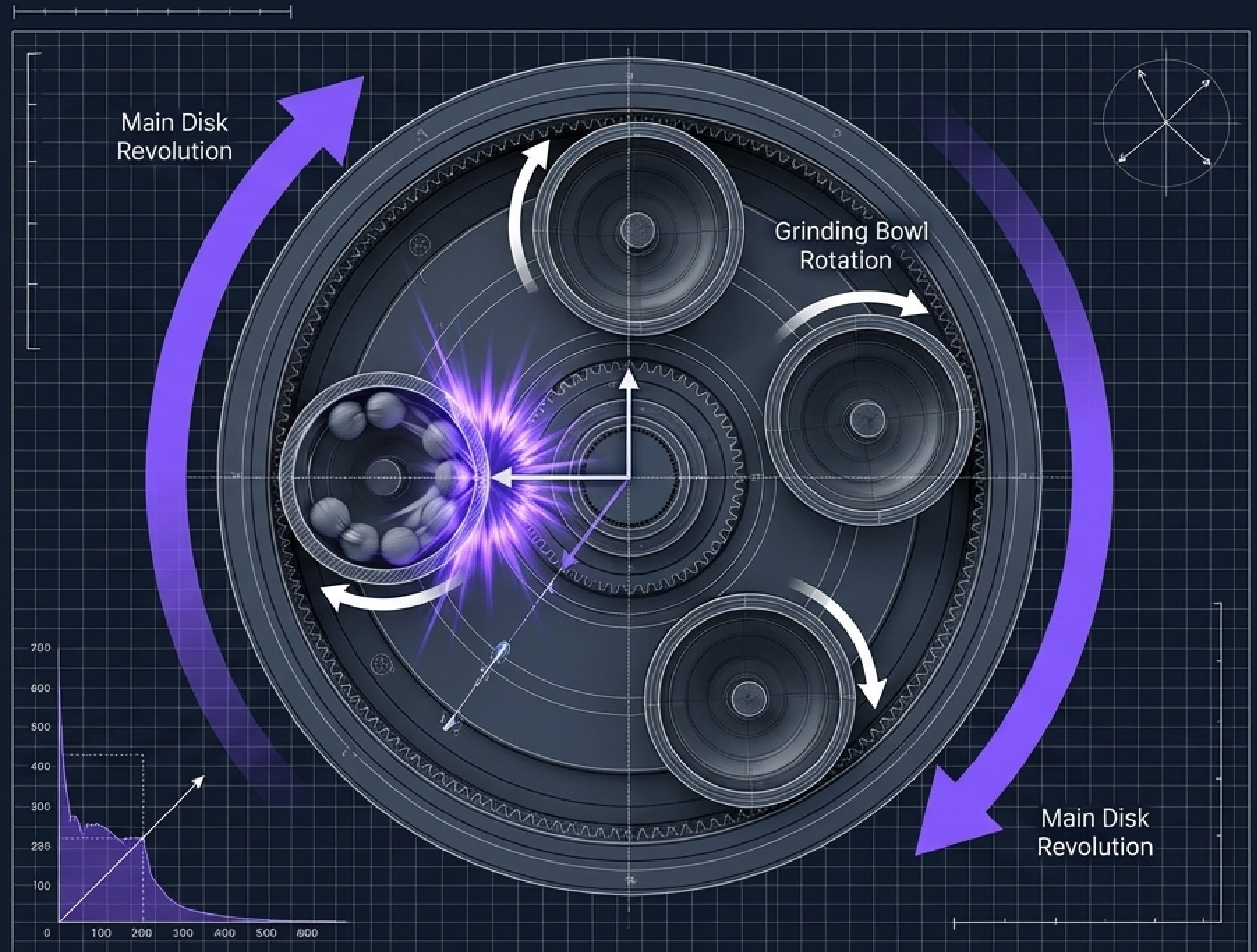

한계 돌파: 최대 95G 원심가속도 도달

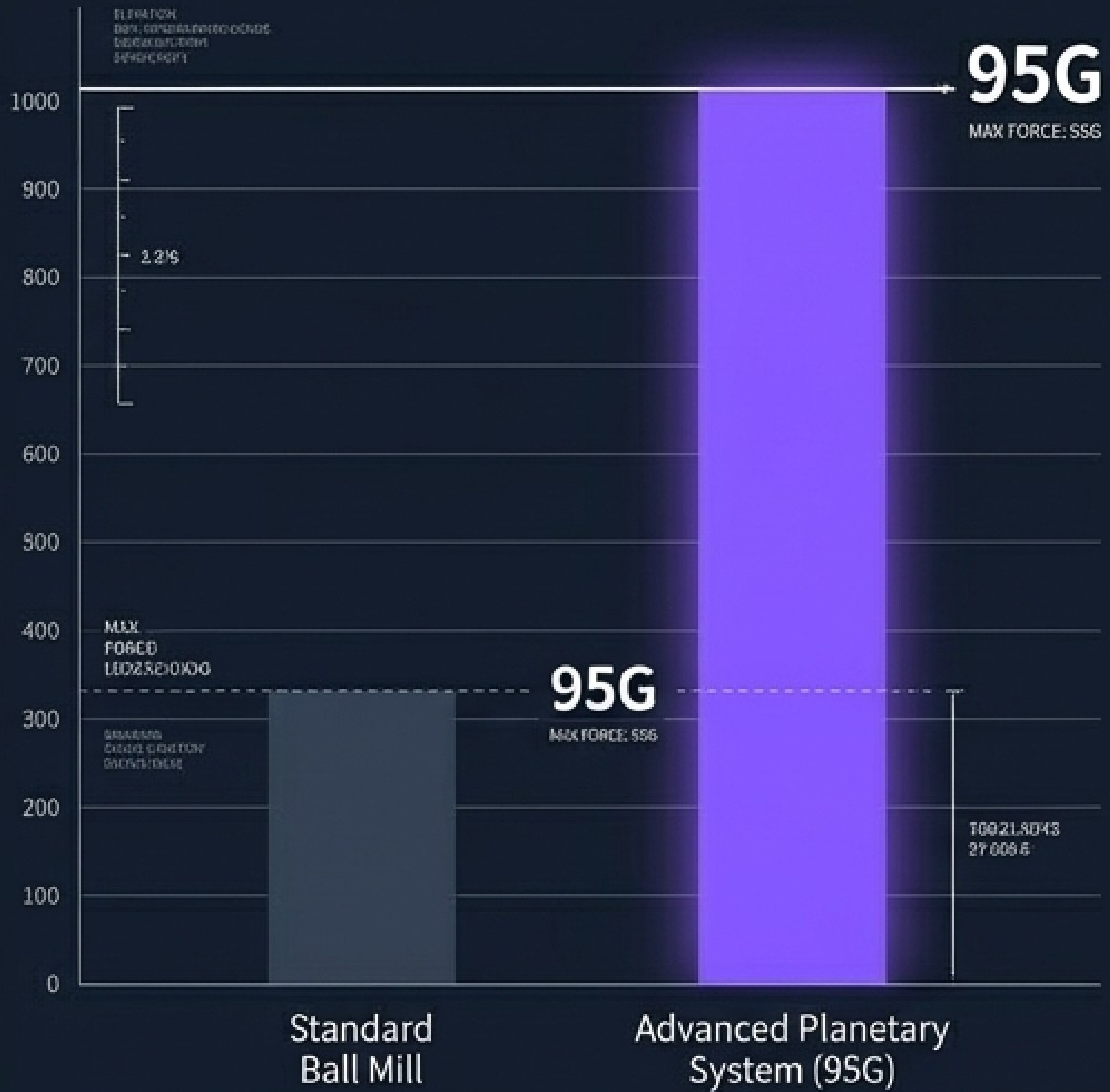

Classic Line: 대용량부터 마이크로까지,
오랜 시간 검증된 정밀 분쇄 솔루션.



Premium Line: 한계를 뛰어넘는 초미세 분쇄 및
기계적 합금화(Mechanical Alloying)의 완성.






PULVERISETTE 5: 대용량 분쇄 최적화

4
Stations

100~400 RPM

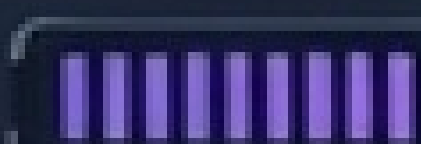

Max
22g

Max **900** ml



PULVERISETTE 6: 고성능 모노 밀

1
Station

100~650 RPM



Max
29g


Max **225** ml



PULVERISETTE 7: 마이크로 밀

2
Stations

100~800 RPM

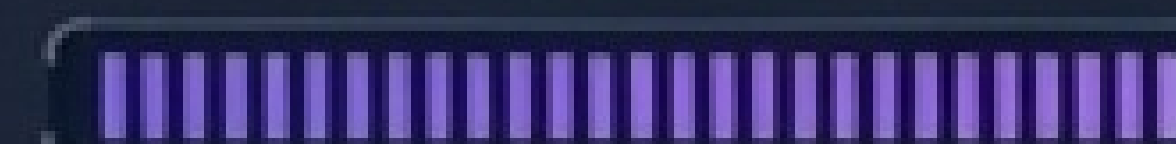

Max
50g

Max **40** ml

PULVERISETTE 5 & 7 Premium: 극한의 퍼포먼스

[성능]

최대 **1,100 RPM** / **95G** 중력 가속도 /
최종 분쇄도 **< 0.1 μm** (Wet).

[UX]

직관적 터치 UI / 자동 볼 포지셔닝

[안전성]

완벽한 클램핑 안전 시스템(ServoLOCK,
SelfLOCK).



차원을 뛰어넘는 압도적 퍼포먼스 (Performance Benchmark)


Metric	PULVERISETTE 7	PULVERISETTE 7 Premium
Max. G-force	50g	[95g]
Rotation speed	100~800 rpm	[100~1,100 rpm]
Final fineness (wet)	< 1 μm	[< 0.1 μm]

시료 오염도 0%를 향한 커스터마이징 (High-Purity Solutions)




Agate (마노): $[SiO_2]$

고순도 시료를 위한 자연 광물 솔루션.

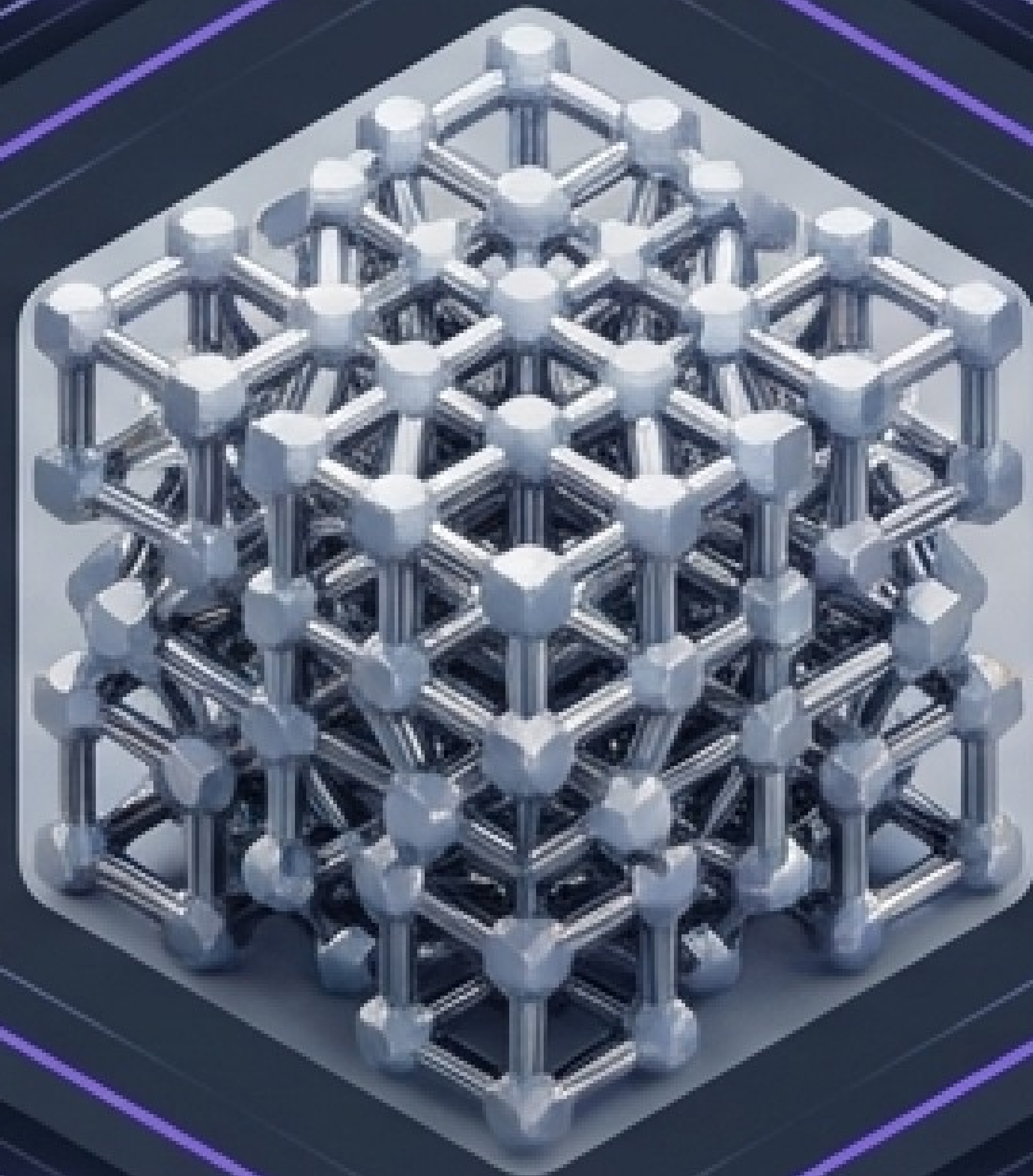

Sintered corundum (소결 코런덤): $[Al_2O_3]$

높은 경도와 우수한 내마모성.

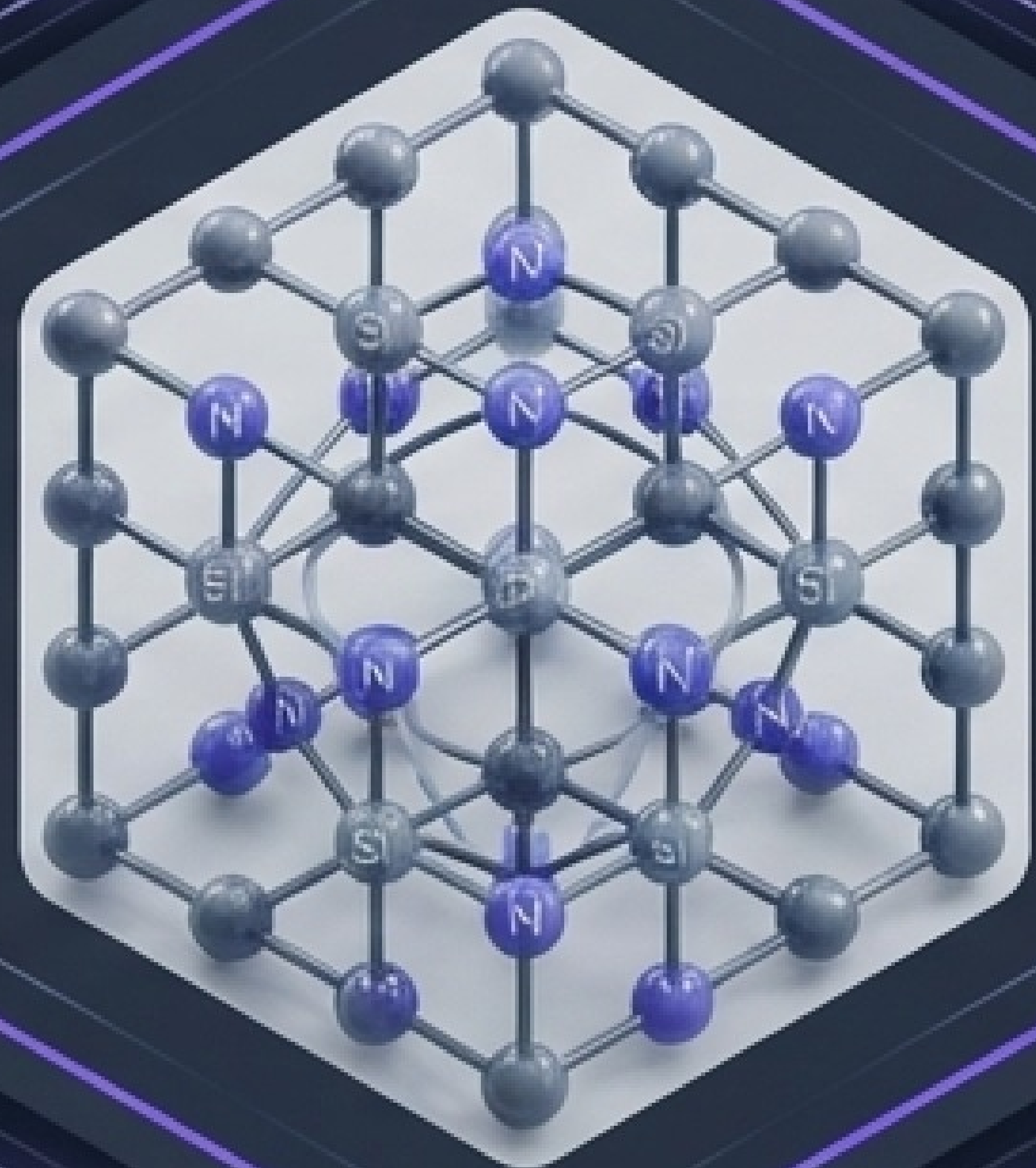

Silicon nitride (질화규소): $[Si_3N_4]$

금속 오염이 완벽히 배제되어야 하는 실험에 최적.

최상의 경도와 내마모성 (Extreme Durability)



Zirconium oxide
(산화지르코늄): $[ZrO_2]$

높은 밀도와 경도를 겸비한 프리미엄 스탠다드.



Hardened stainless steel
(경화 스테인리스): $[Fe-Cr]$

범용적이고 경제적인 분쇄.



Hardmetal tungsten carbide
(초경 텅스텐카바이드): $[WC]$


초경질 재료 분쇄를 위한 궁극의 경도.

기초 소재부터 첨단 바이오까지 전 산업을 아우르는 커버리지




초미세 분쇄를 넘어선 신소재 창조: 기계적 합금화 (Mechanical Alloying)


95G의 극단적 충격 에너지가 고체 상태에서의
원자 확산 및 완전한 융합 유도. 단일 장비로
구현하는 새로운 소재 합성의 프론티어.

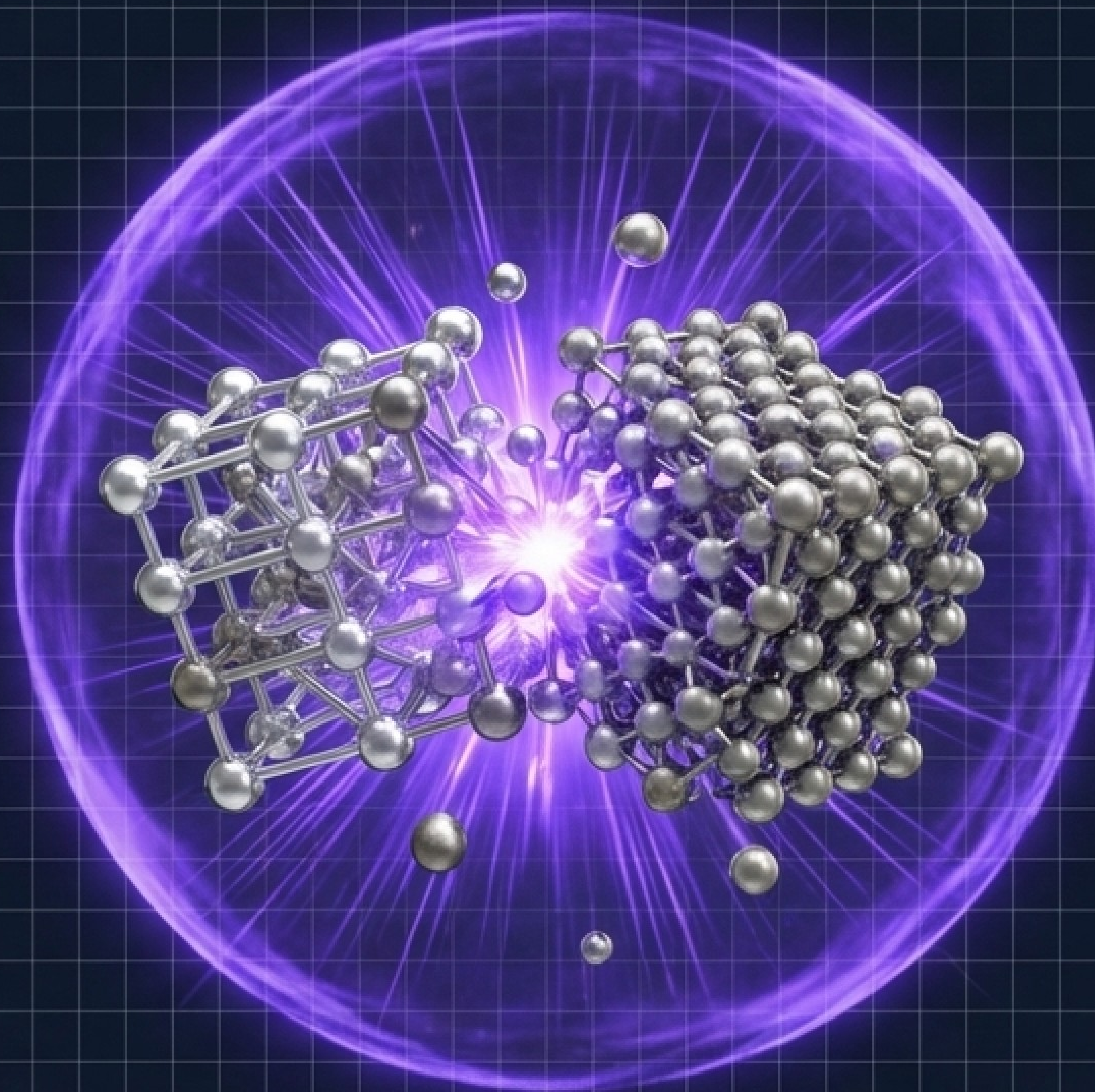

한 치의 오차도 허용하지 않는 통제력 (Precision Meets Safety)

- 대기 노출 제어 및 불활성 가스(Inert Gas) 주입 시스템.
- 산화에 극도로 민감한 금속 합금 및 바이오 시료의 완벽한 보호.

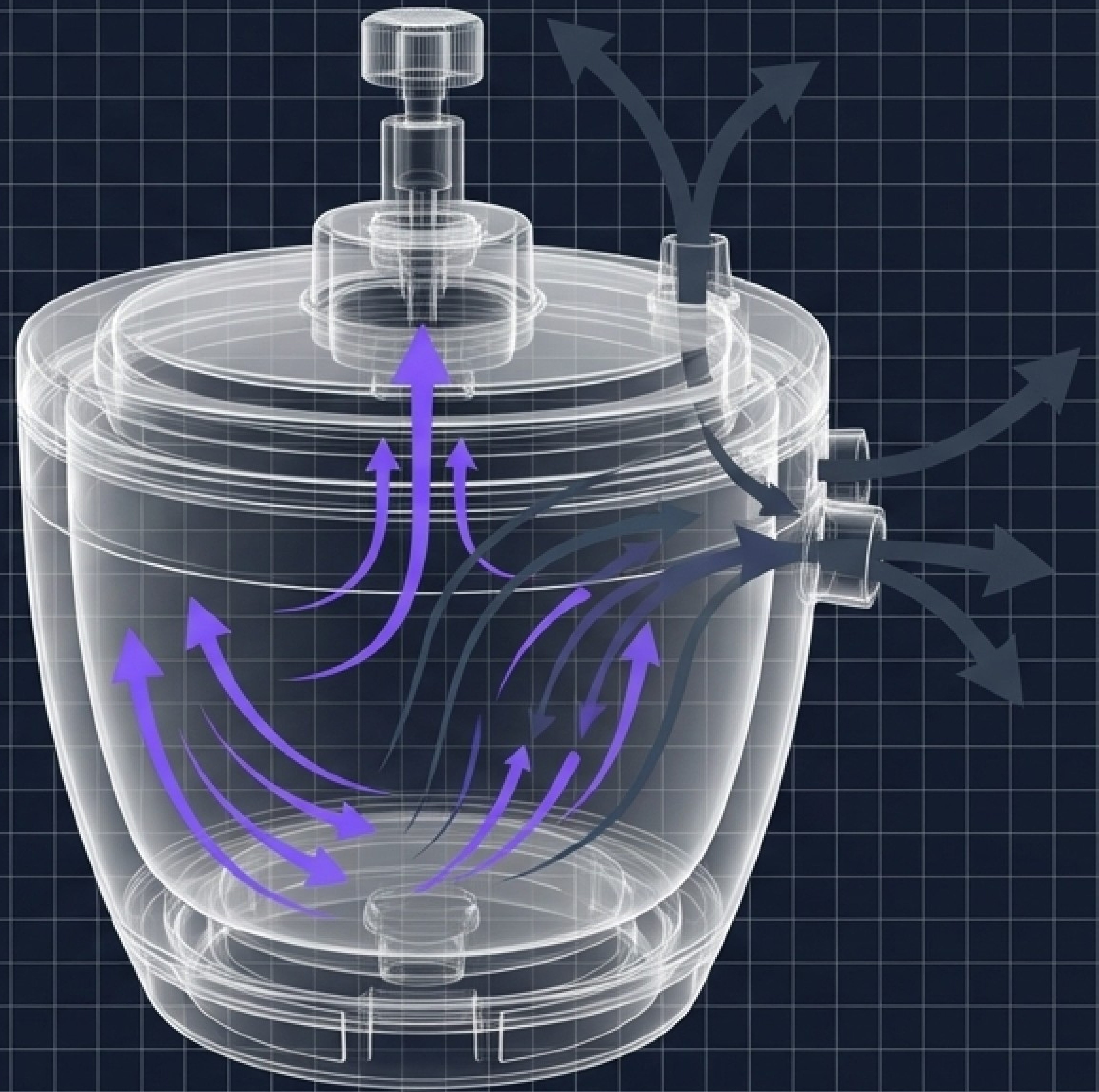

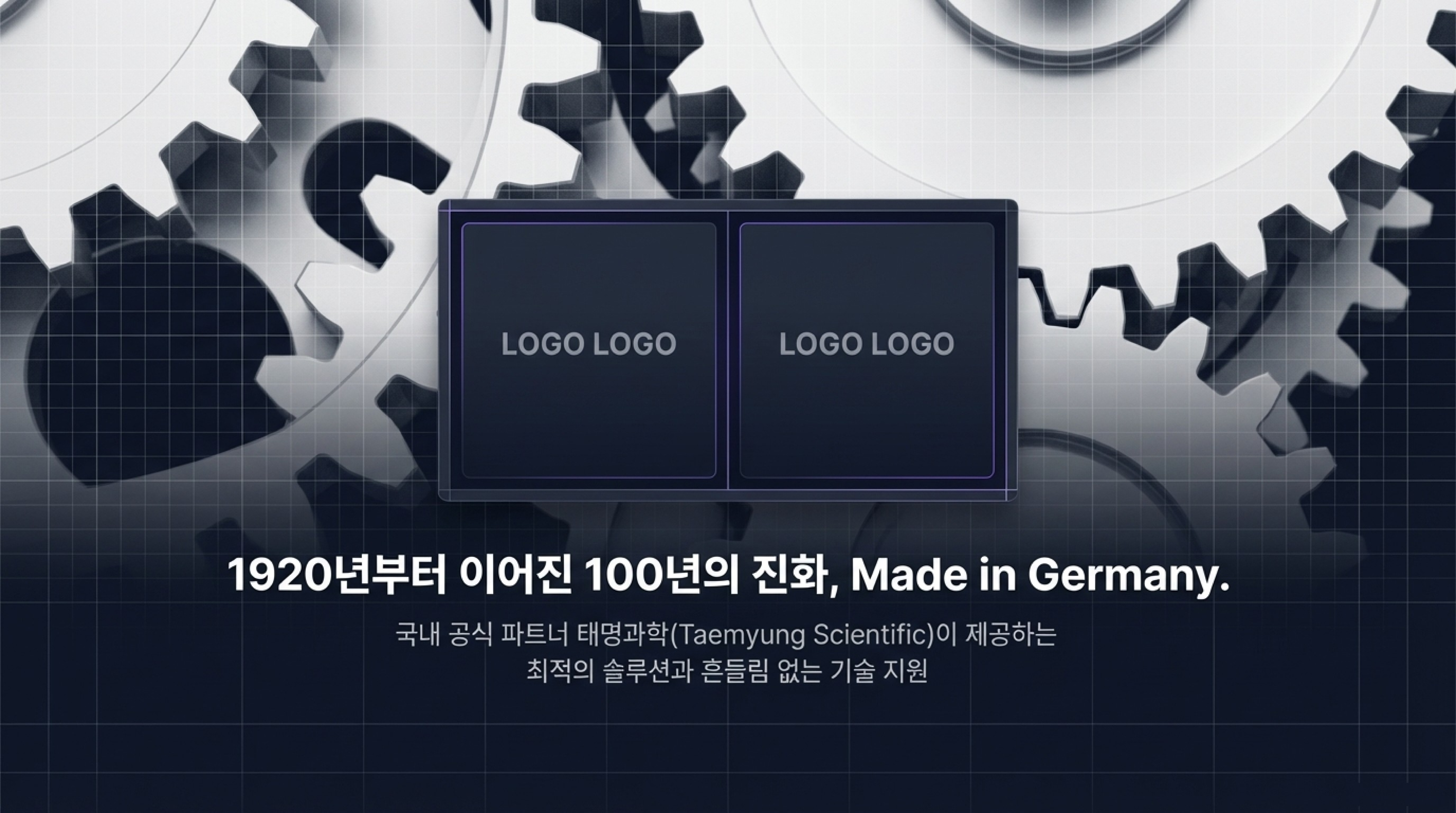

LOGO LOGO

LOGO LOGO

1920년부터 이어진 100년의 진화, Made in Germany.

국내 공식 파트너 태명과학(Taemyung Scientific)이 제공하는
최적의 솔루션과 흔들림 없는 기술 지원



[Contact Us]

웹사이트: www.fritsch.co.kr

기술 및 장비 상담: 031-458-0025

국내 공식 공급원: 태명과학 (Taemyung Scientific)