


SYSTEM INITIALIZATION...

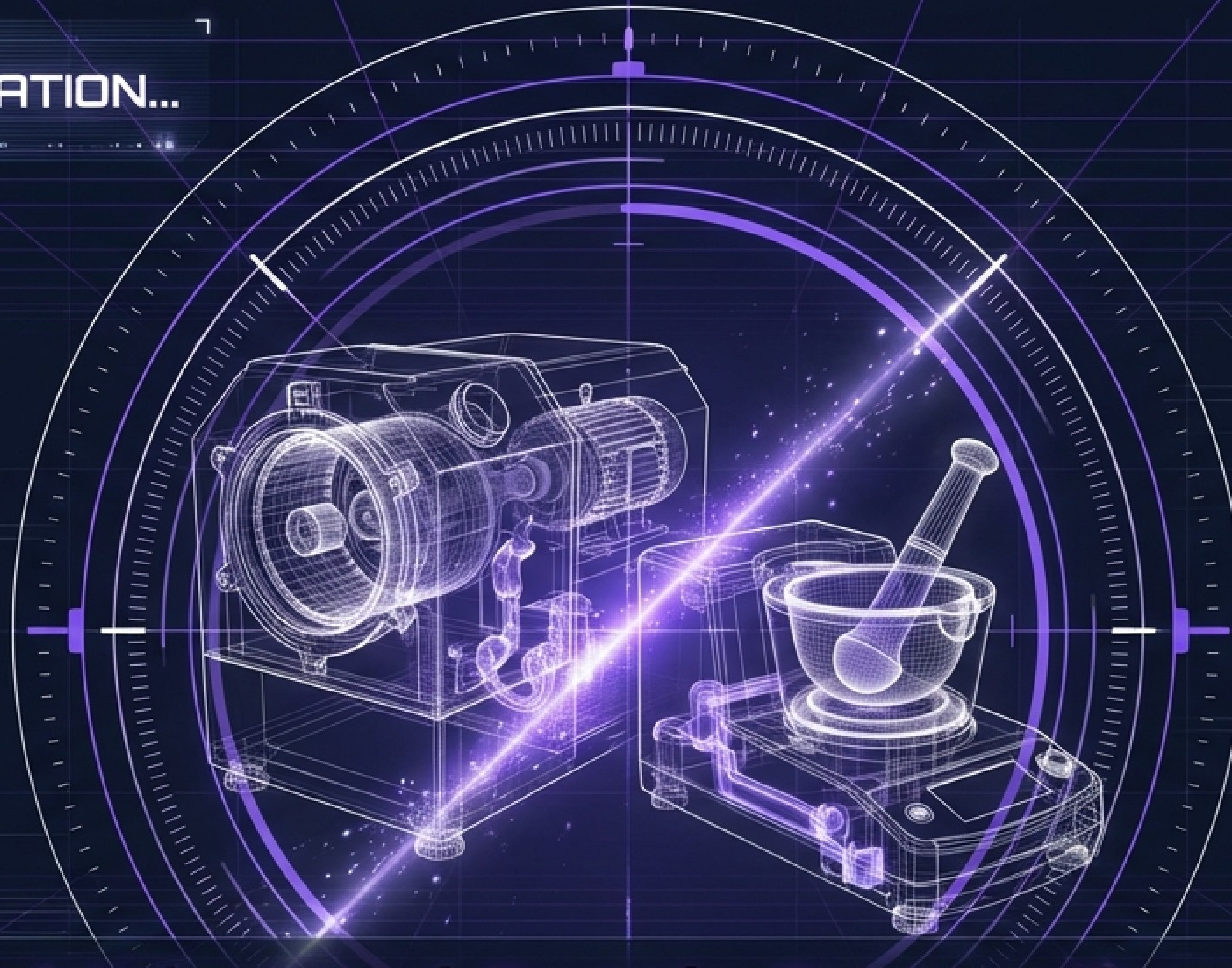

(Main Title) Advanced Sample Preparation Solutions: Cup Mill & Hand Mortar Grinder

[Sub Title] XRF 및 정밀 분광분석을 위한 FRITSCH의 첨단 분쇄 솔루션 가이드 투어

OVERVIEW: TWO PILLARS OF PRECISION



Vibrating Cup Mill

고속 타격 및 마찰을 통한
극미세 분쇄



Hand Mortar Grinder

수작업의 정밀함을 완벽히
재현한 자동화 분쇄

XRF & 분광분석
전처리 최적화

TARGET: PULVERISETTE 9

MAX FEED: 12mm

MOTOR SPEED:
1,100 / 1,300 rpm

FINAL FINENESS: 10~20 μm

Pretendard

Orbitron

용량 옵션: 50, 100, 250ml

시료량: 10~20ml(Min) - 250ml(Max)

Pretendard

Orbitron

배치식 투입

무게: 250kg

크기: 720 x 660 x 1,200mm

KINEMATICS & SAFETY PROTOCOLS



분쇄 메커니즘: Impact & Friction Force (타격 및 마찰력)
작동 방식: Grinding Puck & Ring의 고속 수평 진동



슬라이딩 장착 시스템:
정확한 위치 물리적 유도



Clamping System:
신속하고 견고한 밀폐 고정



Auto-Detection:
장착 오류를 자동 인지하는
스마트 센서 탑재

광업 (Mining)
- 석탄, 광석, 광물 처리



농업/환경 (Agri & Env)
- 토양, 슬러지 분석



야금 (Metallurgy)
- 슬래그, 주철 시료 분석



정밀 분석 (Precision Analysis)
- 규산 함량 결정 및 XRF 시료 전처리 최적화



TARGET: HAND MORTAR GRINDER



Automation of Precision

수작업 유발 분쇄의 터치를 완벽한 기계적 자동화로 재현.



Application

규산 함량 결정 및 X선 형광 분석(XRF)을 위한 시료 분체원료화.



Alternative Solution

기존 Jaw Crusher 및 Disk Mill 라인업을 대체할 수 있는 고효율 전처리 솔루션.



MODEL SPECIFICATION MATRIX



	MORTAR	MOLD-I	MOLD-II
DIMENSIONS	OD 175 ID 120 DEPTH 50MM	OD 140 ID 92 DEPTH 120MM	OD 180 ID 120 DEPTH 50MM
MAX FEED	10MM	8MM	10MM
FINAL FINENESS	1~5MM	1~5MM	1~5MM
WEIGHT	20KG	6.5KG	23KG

GRINDING ELEMENTS CONFIGURATION

Tempered Steel
(강철)



Tungsten Carbide
(텅스텐 카바이드)



Core
Node

Agate
(마노)



맞춤형 교체 시스템
(시료 특성 및 경도에 따른
완벽한 커스터마이징)

Zirconium Oxide
(지르코늄 산화물)



SYSTEM SHUTDOWN // END OF TOUR

FRITSCH 공식 파트너: 태명과학

- 제품 상담 / 데모 테스트 지원
- 전문 기술 지원 및 유지보수 네트워크

TEL: 031-458-0025

WEB: www.fritsch.co.kr